



CorPatch[®]

CorPatch[®] Trainer Quick Start Guide

Deutsch


V1.1 2023.08

CorPatch[®] Trainer Version B11


Wir danken dir, dass du dich unserer Vision anschließt, durch eine qualifizierte Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) bei einem Herzstillstand Leben zu retten und die Überlebensrate zu erhöhen.

Einrichtung deines CorPatch® Trainers

Um deinen CorPatch® Trainer einzurichten, befestige das Klebe-Patch, das mit deinem Gerät geliefert wurde, auf der Rückseite deines CorPatch® Trainers.

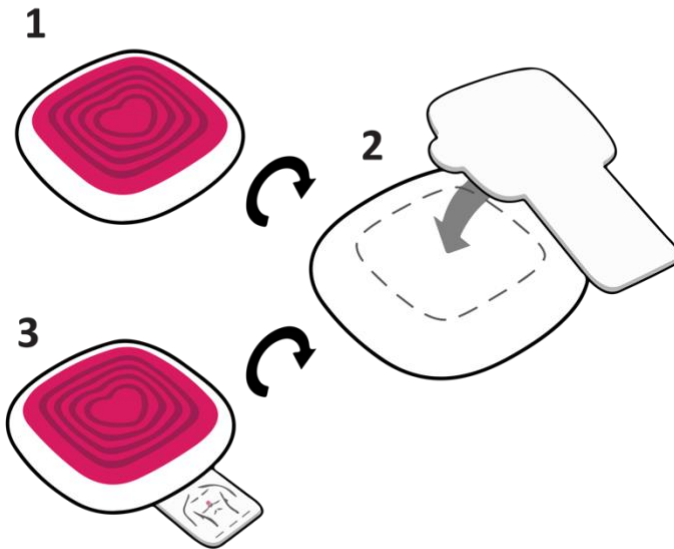

Jetzt kannst du deinen CorPatch® Trainer
an deiner HLW-Trainingspuppe anbringen.

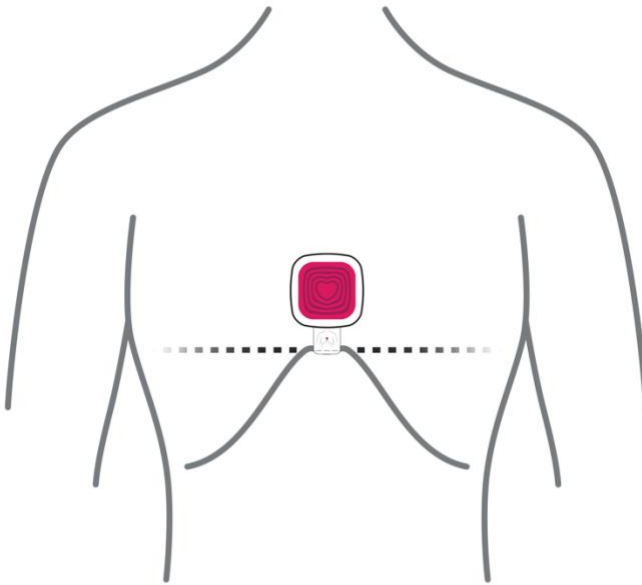

Lade die CorPatch® Trainer App herunter

Lade dir die kostenlose CorPatch® Trainer App auf dein Tablet herunter. Verwende die Anmeldedaten aus deiner Einladungs-E-Mail, um dich in der App anzumelden.




[Google Play Store](#)



[Apple App Store](#)


Einen Kurs erstellen

Einen Kurs erstellen und Informationen hinzufügen.

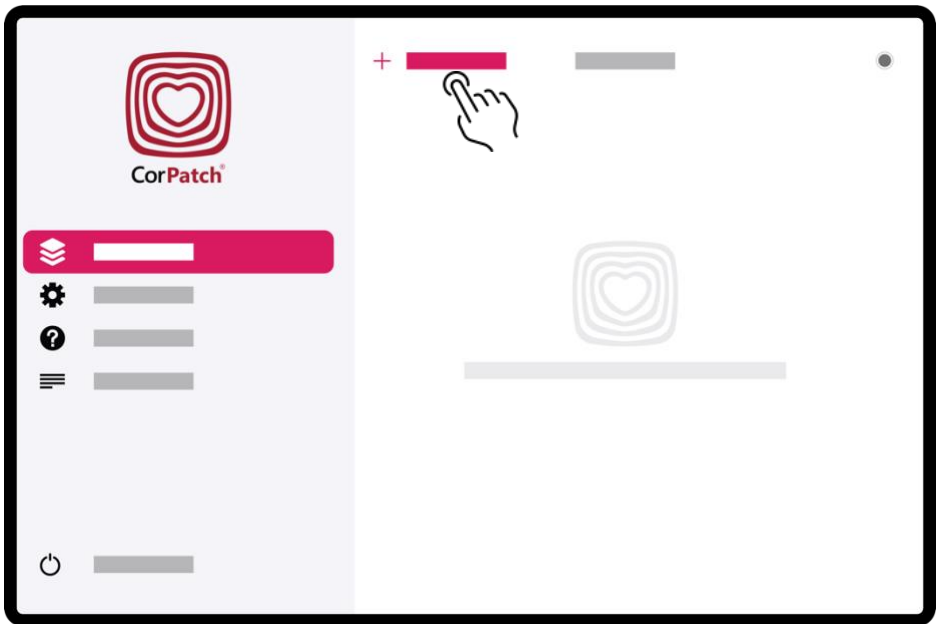

Ein Training erstellen

Ein Training mit deinen bevorzugten Einstellungen erstellen.

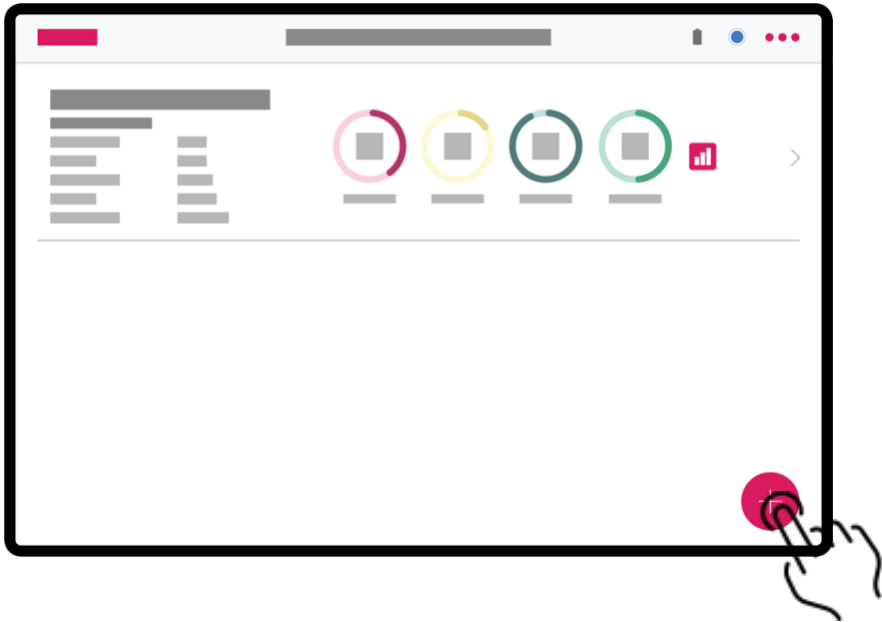

Trainees auswählen

Wähle die Trainees aus, die Teil der Training Session sein sollen. Du kannst ein Einzel- oder Gruppentraining starten.



Verbinde deinen CorPatch® Trainer

Verbinde deinen CorPatch® Trainer, wenn die App dich dazu auffordert.



HLW Training beginnen

Wähle einen der Trainees (#Nummer) auf der linken Seite des Bildschirms aus, indem du auf ihn tippst. Die CorPatch® Trainer App wird dich beim Training der Herzdruckmassage (und Mund-zu-Mund-Beatmung) beraten.



Trainingsergebnisse



Tiefe gibt an, wie viele deiner Kompressionen in einem Bereich von 5-6 cm lagen. **Frequenz** gibt an, wie viele deiner Kompressionen zwischen 100-120 Kompressionen pro Minute lagen.

Entlastung gibt an, bei wie vielen deiner Kompressionen du einen vollständigen Entlastung hattest. **Fluss** gibt die Zeit an, in der du die Kompression ohne Unterbrechung durchgeführt hast.



Mehr Informationen erhalten

Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du dein CorPatch® Trainer System verwendest und individualisierst, wirf einen Blick in das Manual. Außerdem haben wir ein FAQ und ein Erste Hilfe Kompendium erstellt, die dir helfen, dein Wissen über Herzstillstand und Erste Hilfe zu verbessern.

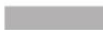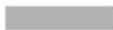



Bitte lies unbedingt die Warnhinweise zu
medizinischen Notfallsituationen im Handbuch
und befolge diese.