

ERLEBEN SIE DEN **OXY** EFFEKT**Incidin™ OxyFoam S & OxyWipe S**

Gebrauchsfertige sporizide¹ Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H₂O₂[™]


**SPORIZID¹ NACH
EN 17126 UND
VAH METHODE 19²**

Die innovativen Produkte Incidin™ OxyFoam S & Incidin™ OxyWipe S bieten den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum.

Sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlassen keine aktiven Rückstände. Die Wirksamkeit von Incidin™ OxyWipe S wurde anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

Incidin™ OxyFoam S & OxyWipe S bieten:

- ▲ Sporizide¹, C. diff. nach EN 17126 und viruzide Wirksamkeit
- ▲ Hi-speed H₂O₂[™]
- ▲ Hohe Anwenderfreundlichkeit
- ▲ Exzellente Materialverträglichkeit

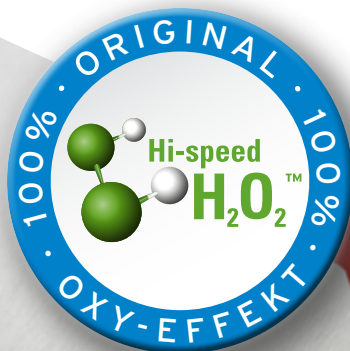

Incidin™ OxyFoam S & OxyWipe S


Gebrauchsfertige sporizide¹ Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H₂O₂TM

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
EFFEKTIV	Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten
SICHER	Exzellente Materialverträglichkeit - Keine aktiven Rückstände - Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
ANWENDERFREUNDLICH	Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel - Reinigen & Desinfizieren in einem Schritt


WIRKSAMKEIT	Einwirkzeit OXYFOAM S	Einwirkzeit OXYWIPE S
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015, hohe Belastung		
Bakterizid, levurozid	5 Min.	15 Min.
Fungizid	5 Min.	30 Min.
Tuberkulozid, mykobakterizid	15 Min.	30 Min.
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäss RKI-Empfehlung 1/2004*	15 Sek.	30 Sek.
Norovirus (MNV)*	30 Min.	60 Min.
Adenovirus*	30 Sek.	1 Min.
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	30 Sek.	30 Sek.
Rotavirus*	15 Sek.	15 Sek.
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bakterizid)	1 Min.	2 Min.
EN 13624 (levurozid)	1 Min.	15 Min.
EN 13624 (fungizid)	5 Min.	30 Min.
EN 14348 (tuberkulozid, mykobakterizid)	5 Min.	30 Min.
EN 14476 (viruzid)	2 Min.** / 30 Min.	30 Min.**
EN 14476 (begrenzt viruzid PLUS)	1 Min.** / 15 Min.	15 Min.
EN 14476 (Adenovirus)	30 Sek.	30 Sek.
EN 14476 (Norovirus)	1 Min.** / 15 Min.	15 Min.
EN 17126 (sporizid)	60 Min.**	-
EN 17126 (C. difficile)	30 Min.** / 60 Min.	60 Min.
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)		
EN 16615 (bakterizid)	1 Min.	2 Min.
EN 16615 (levurozid)	1 Min.	1 Min.
EN 16615 (fungizid)	5 Min.	5 Min.
EN 16615 (tuberkulozid, mykobakterizid)	5 Min.	5 Min.
Sporizid gegen C. diff gem. VAH Methode 19/CEN TC 216 WG1 prWI Okt 2020 (EN 16615 Methodik)	15 Min.**	15 Min.**

* DVV 2008 (Susp. Test) ** Geringe Belastung

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR INCIDIN™ OXYFOAM S

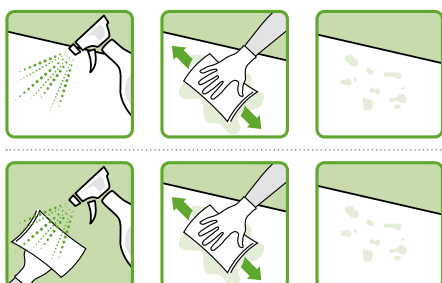

- 1 Aus einem Abstand von ca. 30 cm auf die Oberfläche sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

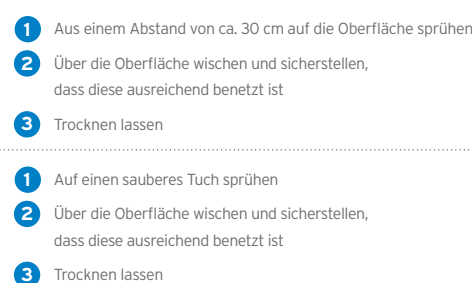

- 1 Auf einen sauberes Tuch sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

EUROPEAN HEADQUARTERS: ECOLAB EUROPE GMBH

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44-877-2001

www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900

www.ecolabhealthcare.de



ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH

Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41 (0) 61-466-94-66

www.ecolabhealthcare.ch

ANWENDUNGSBEREICH

Incidin™ OxyFoam S: Schaumspray zur Reinigung und Desinfektion medizinischer Oberflächen (einschl. z.B. Sonden) und medizinischem Inventar.



Incidin™ OxyWipe S: Reinigungs- und Desinfektionstücher für medizinische Oberflächen (einschl. z.B. Sonden) und Inventar.

Ⓛ BIOZID N-61596
Ⓛ BIOZID N-61597
Ⓛ CHZN 4102
Ⓛ CHZN 4100

GEBRAUCHSANWEISUNG

Incidin™ OxyFoam S: Anwendungsfertige Lösung. Unverdünt auf Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und auf ausreichende Benetzung achten. Dann mit einem sauberen Tuch nachwischen oder Produkt unverdünt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen und abtrocknen lassen.

Incidin™ OxyWipe S: Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen und trocknen lassen. Flowpack wieder verschliessen.

Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

WIRKSTOFF

100 g enthalten:

Incidin™ OxyFoam S: 1,5 g Wasserstoffperoxid
Incidin™ OxyWipe S: 1,5 g Wasserstoffperoxid

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin™ OxyFoam S	6 x 750 ml	30 820 60 PZN 1115 60 76
Incidin™ OxyFoam S	2 x 5 L	30 874 50 PZN 1160 65 79
Auslaufhahn Fertiglösungen (DIN 51)	1 Stück	100 338 73
Incidin™ OxyWipe S	6 x 100 Tücher Tuchgrösse: 20 x 20 cm	30 822 40 PZN 1115 60 82
Incidin™ OxyWipe S XL	6 x 50 Tücher Tuchgrösse: 25 x 37 cm	30 920 40 PZN 138 320 15
Wandhalterung für Incidin™ OxyWipe S	1 x 6 Stück	100 338 77

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern.

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit nach dem Öffnen:

Incidin™ OxyFoam S: Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum
Incidin™ OxyWipe S: 3 Monate

Referenzen

1. Incidin™ OxyWipe S ist sporizid gegenüber C. difficile Sporen.
2. Sporizid gegenüber C. difficile Sporen.

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.