

Hohe Saugleistung

Leicht und tragbar

Mit einer Hand bedienbar




Handabsaugpumpe

Zum schnellen und effektiven Absaugen von Flüssigkeiten aus Mundhöhle und Rachenraum

/ Handabsaugpumpe

- Kostengünstige Alternative für Rettungsdienstpersonal und Ersthelfer
- Findet problemlos Platz in allen gängigen Notfallkoffern und -taschen
- Immer einsetzbar, da die Bedienung des Produkts energieunabhängig ist

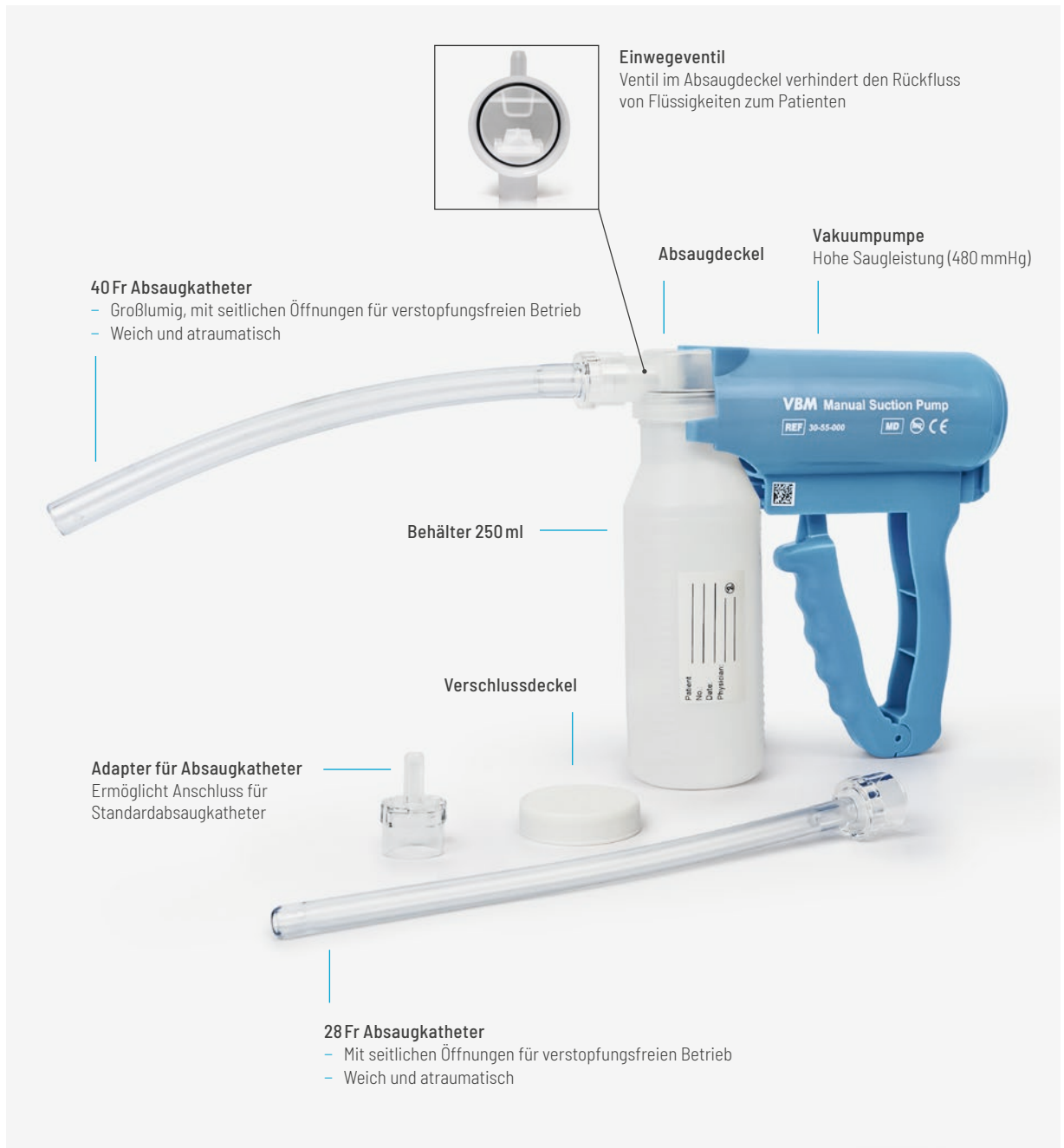

40Fr Absaugkatheter

- Großlumig, mit seitlichen Öffnungen für verstopfungsfreien Betrieb
- Weich und atraumatisch

Einwegeventil

Ventil im Absaugdeckel verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten zum Patienten

Absaugdeckel

Vakuumpumpe

Hohe Saugleistung (480 mmHg)

Behälter 250 ml

Verschlussdeckel

Adapter für Absaugkatheter

Ermöglicht Anschluss für Standardabsaugkatheter

28Fr Absaugkatheter

- Mit seitlichen Öffnungen für verstopfungsfreien Betrieb
- Weich und atraumatisch

Bestell-
information

Handabsaugpumpe Set / Vakuumpumpe, Absaugkatheter (28 Fr und 40 Fr), Behälter 250 ml, Verschlussdeckel, Adapter für Standard-Absaugkatheter, Absaugdeckel
Vakuumpumpe: wiederverwendbar
Zubehör: zum Einmalgebrauch

REF	VE
30-55-000	1

Zubehör Set für Handabsaugpumpe / Absaugkatheter (28 Fr und 40 Fr), Behälter 250 ml, Verschlussdeckel, Adapter für Standard-Absaugkatheter, Absaugdeckel
Zum Einmalgebrauch

REF	VE
30-56-000	1

Komplettes Zubehör in einem Set

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany
Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: verkauf@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Folgen Sie uns auf:



PRO049_1.0_DE