

SPENCER KINETIX

REVOLUTIONIERUNG DES
PATIENTENTRANSPORTS
MIT FORTSCHRITTLICHER
ANTRIEBSTECHNOLOGIE



- ✓ Sicherheit
- ✓ Manövrierfähigkeit
- ✓ Professionalität
- ✓ Ergonomie



Demo ansehen



Merkmale



Die Revolution des Patiententransports mit fortschrittlicher Antriebstechnologie



KINETIX ist eine motorisierte Fahrtrage, die das Beladen von Kranken- und Rettungswagen vereinfacht und mühelos Gewichte bis zu 300 kg tragen kann. Ausgestattet mit einem intuitiven Bedienfeld können die Bediener die Höhe der Trage stufenlos einstellen und die Hebe- und Senkbewegungen mit Präzision steuern. LED-Leuchten verbessern die Sichtbarkeit. Die klappbaren und verstellbaren Seitenschiene erweitern die Liegefläche der Trage und erleichtern den Transport von bariatrischen Patienten. Mit einer anpassbaren Rahmenlänge, ausziehbaren Teleskopgriffen und Lenkrollen mit Arretierung gewährleistet die **KINETIX** auch bei beengten Platzverhältnissen eine hervorragende Manövrierfähigkeit.

VERBESSERUNG DER NOTFALLVERSORGUNG MIT MODERNSTER TECHNOLOGIE



Schutz für Ihren Rücken



Hohe Tragfähigkeit



Bariatrischer Transport



Trendelenburg



Fowler und Semi-Fowler



Verkürzungsrahmen



LED-Beleuchtung



Intuitive Bedienelemente



Doppelter Akku



Made for Decisive Moments

Medical
EU Device
Regulation

EN 1789
IPX6

10g
Approved
SPENCER

CE

AKUSTISCHES SIGNAL

Danke dieser Taste kann ein akustisches Signal aktiviert werden und erleichtert durch die erhöhte Aufmerksamkeit den Transport in überfüllter Umgebung.

LED-SEITENLICHT


LED- Leuchtenbänder auf beiden Seiten am oberen Teil des Fahrgestells sorgen für bessere Sichtbarkeit in dunklen Bereichen. Die Bediener können sie über das Bedienfeld im Dauer- oder Blinklichtmodus aktivieren .

ERGONOMISCHES BEDIENFELD

Über das ergonomische Bedienfeld und einige wenige Tasten kann der Bediener die gewünschte Höhe der Fahrtrage einstellen, die seitlichen LED-Leuchten einschalten, den Ladezustand der Batterie überprüfen und ein akustisches Signal an belebten Orten aktivieren. Der Rücken des Bedieners wird beim Verladen der Trage auf das Fahrzeug vollständig geschont.

DOPPELT AUFLADBARE BATTERIE

Zwei 24-V-Lithium-Batterien mit automatischer Umschaltung des Ladezustands laden nacheinander, um den gleichzeitigen Einsatz zu gewährleisten und das Ausfallrisiko zu minimieren. Volle Ladezeit: 120 Minuten.

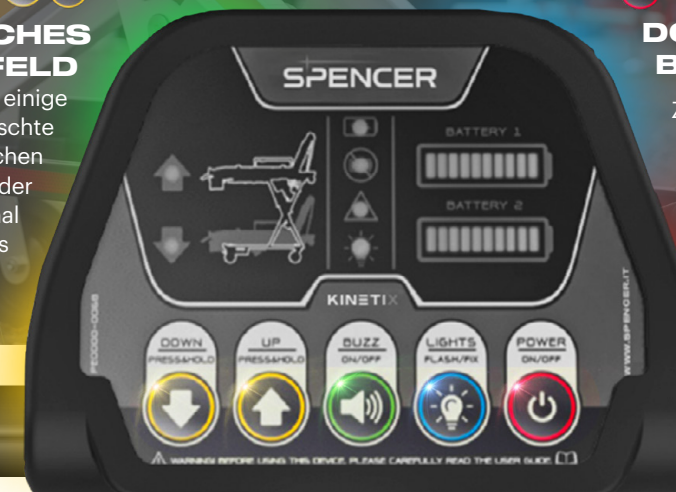

WARUM KINETIX?

SCHÜTZT IHREN RÜCKEN

Mit dem motorisierten KINETIX-Hebesystem kann der Bediener per Knopfdruck bis zu 300 kg in den Krankenwagen heben, senken und verladen - ohne jegliche körperliche Anstrengung

ENERGIE-EFFIZIENZ

Die KINETIX ist energieeffizient, da sie von 2 x 24-V-Lithiumbatterien angetrieben wird, die sich nacheinander aufladen, um den Verbrauch zu minimieren, die Leistung zu steigern und das Ausfallrisiko drastisch zu reduzieren.

VIELSEITIG UND VARIABEL

Für den Transport von Patienten mit einer robusten Statur ist es nicht erforderlich, bariatrisches Zubehör mitzuführen oder bariatrische Tragen zu verwenden. In diesen Fällen werden bei KINETIX, einfach die beiden Seitenwände genutzt, um die Breite der Liegefläche zu vergrößern. Mit einer Belastungsgrenze von 300 kg ist die KINETIX auch für den Transport bariatrischer Patienten geeignet.

MOBIL UND VERKÜRZBAR

KINETIX ist mit 4 Lenkrollen und Vorderradbremse ausgestattet, um Richtungsänderungen zu erleichtern und Hindernisse auf dem Weg zu vermeiden. Die Gesamtlänge der Trage kann durch Anheben der Rückenlehne und Einziehen der Teleskopgriffe verkürzt werden: Dies ist besonders nützlich, wenn die Trage in engen Räumen wie Aufzügen transportiert werden soll.

Ein manuelles Backup-System ermöglicht das Entladen der KINETIX-Trage aus dem Rettungsfahrzeug, falls das motorisierte System ausfällt.

WARTUNG DER TRAGEN

service@spencer.it

RAIL TRAGENTISCH IM LIEFERUMFANG DER KINETIX-TRAGE



ELEKTRISCHER TRAGENTISCH


RAIL wurde speziell für die elektrische Fahrtrage KINETIX entwickelt und verfügt über ein 10-G-Fixierungssystem. Sie ist seitlich beweglich und hat ein Fach zur Unterbringung eines Spineboards oder einer Schaufeltrage.




Unterstütztes Ein- und Ausladen



Automatisches Aufladen der Trage

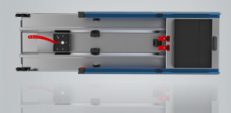

Seitliche Bewegung

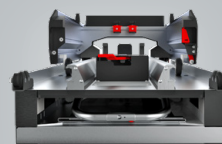

Fach für Spineboard oder Schaufeltrage


KINETIX

10G angetriebene Krankentrage



ARTIKELNUMMER	KN00001
LÄNGE	200 cm
MIN. LÄNGE (BEI EINBAU)	162,5 cm
BREITE	59 cm
BREITE (BARIATRISCHE KONFIGURATION)	90 cm
HÖHE MIN./MAX.	42 / 130 cm
GEWICHT	88 kg*
NEIGUNGSWINKEL DER RÜCKENLEHNE	75°
TRENDELENBURG NEIGUNGSWINKEL	30°
FOWLER NEIGUNGSWINKEL	17°
RÄDERGRÖSSE	Ø 16 x 4 cm
ABMESSUNGEN DER MATRATZE	190 x 46 cm
MAX. BELADEHÖHE	92 cm
LASTKAPAZITÄT	300 kg
BATTERIE-TYP	2 x 24 V Lithium
AUFLADEZEIT	120 min
BETRIEBSTEMPERATUR	-20°C / +40°C

* Zubehör nicht enthalten.

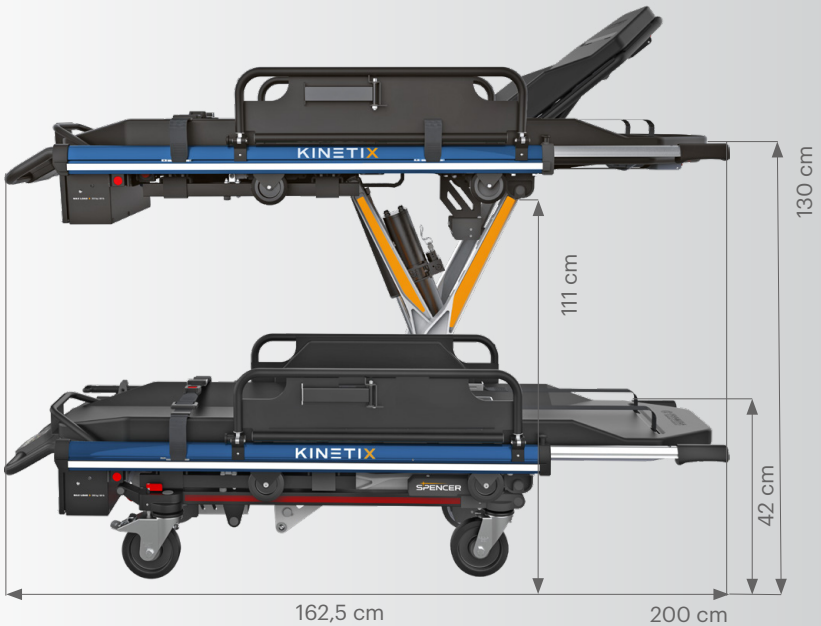



RAIL

Elektrischer Tragentisch




ARTIKELNUMMER	KN00002*
LÄNGE	204 cm
BREITE	60 cm
GEWICHT	140 kg
BELASTBARKEIT	300 kg
SEITLICHE BEWEGUNG	30 cm
FRONTALE BEWEGUNG	164 cm
BETRIEBSTEMPERATUR	-20°C / +40°C

*Version ohne Verstaufach ebenfalls erhältlich (code: KN00003)

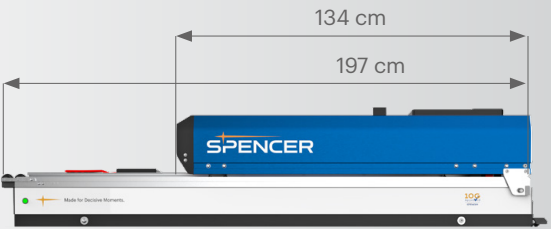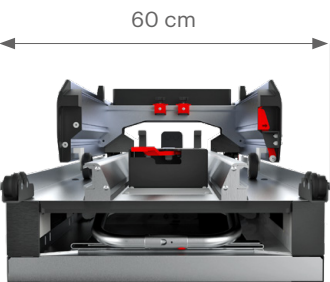


ZUBEHÖR
ZUR KINETIX-TRAGE
UND
SCHIENENPLATTFORM


Die KINETIX wird komplett mit einer hygienischen Matratze mit verschweißten Nähten, einer ausziehbaren Kopfstütze, Haltegurten, seitlichen Auflageschienen und einer Dokumententasche geliefert.

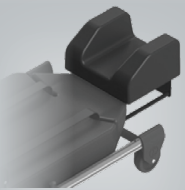


Ergonomische
Kopfstütze

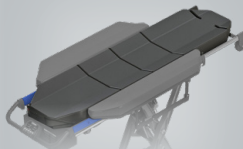

Verschweißte Matratze

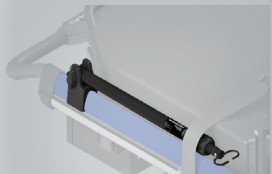

Verstellbares
Infusionsstativ

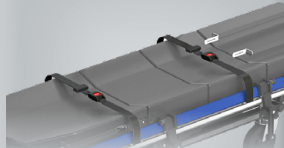

Rückhaltgurte



SPENCER KINETIX

Revolutionierung des Patiententransports mit
fortschrittlicher Antriebstechnologie



#madefordecisivemoments