



LMA® | Rüsch
Teleflex Airways
Lange Tradition kontinuierlicher Innovation

Teleflex

Laryngealmasken 2–13

Laryngealmasken der zweiten Generation. 2–5

Laryngealmasken der ersten Generation 6–9

Spezial-Laryngealmasken 10–13

LMA® Gastro 10–11

LMA® Fastrach 12–13

CuffdruckMonitoring / Manometer 14–15

Endotrachealtuben 16

Endotrachealtuben zur subglottischen Absaugung . . . 16–17

Endotrachealtuben für Standardintubationen 18–22

Verstärkte Endotrachealtuben 23–25

Anatomisch vorgeformte Endotrachealtuben 26–28

Mikrolaryngealtuben. 29

Lasertubus 30

Mandrins und Tubuswechsler 31–33

Bronchusblocker und Bronchialtuben 34–39

Bronchusblocker. 34–35

Bronchialtuben. 36–39

Medikamentenzerstäuber 40–41

Oropharyngeal- und Nasopharyngealtuben . 42–45

Anästhesiemasken / Atembeutel 46–48

Beatmungsbeutel 49

Zubehör 50–51

Konnektoren. 52

Weitere erhältliche Teleflex-Sortimente . . 53–55

Index. 56–57

Eine lange Tradition kontinuierlicher Innovation und stetiger Verbesserung

Patienten und Pflegepersonal auf der ganzen Welt verlassen sich auf Teleflex Atemwegsprodukte zur Erleichterung der Atmung.

Unser Ziel besteht darin, ein verlässlicher, starker Partner für Medizinprodukte zu sein, um Ihnen dabei zu helfen, das Risiko zu minimieren und die Ergebnisse für Ihre Patienten zu maximieren. Wir sind davon überzeugt, dass qualitativ hochwertige Produkte positive Auswirkungen auf die Patientenversorgung und auch auf die Bilanz der Klinik haben. Deshalb schaffen wir Produkte, die praktische Atemwegsmanagement-Lösungen bieten und so dazu beitragen, atemwegsbedingte Komplikationen zu reduzieren und die Verfahrenseffizienz zu verbessern.

Auf der Basis kontinuierlicher Innovationen sind führende Marken von Teleflex wie Rüsch, LMA®, Gibeck und Sheridan in einem Produktportfolio zusammengefasst, das Endotrachealtuben, Bronchialtuben und Bronchusblocker, Laryngealmasken, oropharyngeale und nasopharyngeale Tuben, Tracheostomiekannülen, Narkose-Schlauchsysteme, Masken und Beutel beinhaltet.

Unser Hauptanliegen bei Teleflex besteht darin, Ihnen Produkte von gleichbleibend hoher Qualität und Leistung im Bereich des Atemwegsmanagements zu bieten, um Ihnen dabei zu helfen, sich auf das zu konzentrieren, was für Sie das Wichtigste ist: Ihr Patient.

Teleflex ist ein weltweit führender Anbieter medizinischer Technologien zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität der Menschen.



Erhältliche Kindergrößen

Um den speziellen Erfordernissen pädiatrischer Patienten zu entsprechen, liefert Teleflex eine große Bandbreite an Tracheal- und Bronchialtuben. Häufig verwendete Modelle sind auch in kleineren Größen erhältlich.



Einwegprodukt



Zur Verwendung bei einem Patienten



Bis zu maximal 10 Anwendungen



Bis zu maximal 40 Anwendungen



Latexfrei



OHNE DEHP

Um die Sicherheit des Patienten zu erhöhen, bietet Teleflex eine DEHP-freie Produktpalette an.



Ohne Phthalate hergestellt



MRT-fähig

Alle angegebenen Größen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Geringfügige Abweichungen sind möglich.



Laryngealmasken

Mehr Sicherheit und Komfort in Anästhesie und Notfallmedizin

Die wahren Vorteile von Laryngealmasken sind: Sie sind weniger invasiv als Endotrachealtuben und können leicht eingeführt werden. Deshalb werden Laryngealmasken sowohl in der Anästhesie als auch in der Notfallmedizin zum Atemwegsmanagement eingesetzt.

Teleflex verfügt über ein großes Angebot an Laryngealmasken, um so den Bedürfnissen von Patient und Klinik gerecht werden zu können. Dazu gehören das Portfolio der LMA® Laryngealmasken mit der LMA® Supreme, einer Atemwegshilfe der zweiten Generation mit Magenzugang, und die LMA® Unique Laryngealmaske mit integrierter Cuff Pilot-Technologie.

Die LMA® Protector ist die leistungsfähigste Laryngealmaske der zweiten Generation von Teleflex.

Zwei Drainagekanäle

Die einzige Laryngealmaske, die eine pharyngeale Kammer mit zwei Magen-Drainagekanälen kombiniert, speziell entwickelt, um Mageninhalte vom Atemweg abzuleiten.

Silikon

Der Atemwegstubus und der Cuff bestehen zu 100 % aus Silikon, sind phthalatfrei und der Anatomie angepasst. Cuffs aus Silikon reduzieren nachgewiesenermaßen das Risiko von Halsschmerzen¹ und erzielen höhere Dichtigkeiten.²

Cuff Pilot-Technologie

Ein integrierter Cuffdruckanzeiger für Einweg-Atemwegsmanagement-Instrumente, der eine kontinuierliche Überwachung des Cuffdrucks auf einen Blick bietet und bei Bedarf einfache, präzise Anpassungen ermöglicht. Falsch gefüllte Cuffs können sich negativ auf die Patientensicherheit³ auswirken. Weitere Informationen zur Cuff Pilot-Technologie finden Sie auf Seite 14.

Second Seal Technologie

Der verlängerte Cuff unterstützt die Abdichtung gegenüber dem oberen Ösophagusphinkter.

Möglichkeit zum Intubieren

Erlaubt ein direktes Intubieren unter fiberoptischer Kontrolle.

1. William A, Chambers NA, Erb TO, von Ungern-Sternberg BS. Incidence of sore throat in children following use of flexible laryngeal mask airways – impact of an introducer device. *Pediatr Anesth*. 2010;20(9):839-843.
2. Bell SF, Morris NG, Rao A, Wilkes AR, Goodwin N. A randomised crossover trial comparing a single-use polyvinyl chloride laryngeal mask airway with a single-use silicone laryngeal mask airway. *Anaesthesia*. 2012;67(12):1337-1342.
3. Bick E, Bailes I, Patel A, Brain AIJ. Fewer sore throats and a better seal: why routine manometry for laryngeal mask airways must become the standard of care. *Anaesthesia*. 2014;69(12):1304-1308.


LMA® Protector

Laryngealmaske mit duallem Magenzugang

Aus Silikon und erhältlich mit Cuff Pilot-Technologie

Die LMA® Protector ist ein Einwegprodukt der zweiten Generation, das einen innovativen dualen Magenzugangskanal und eine effektive Second Seal-Technologie zur Abdichtung am oberen Ösophagussphinkter bietet. Sie ermöglicht die direkte Intubation unter fiberoptischer Kontrolle.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

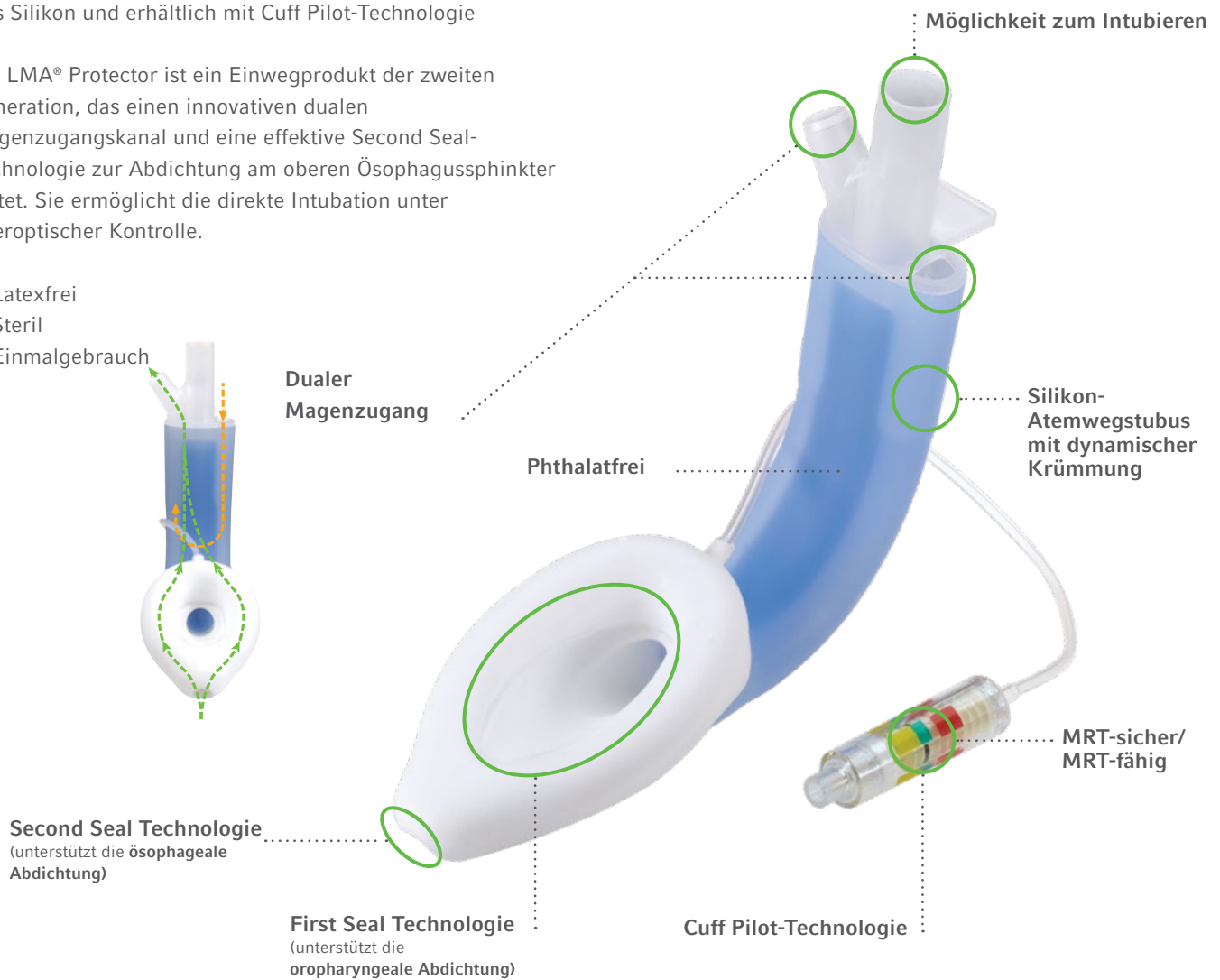

LMA® Protector Airway

ART.-NR. MIT CUFF PILOT-TECHNOLOGIE	ART.-NR. MIT KONTROLLBALLON	GRÖSSE DER MASKE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAXIMALER CUFFINNENDRUCK**	GRÖSSTER ETT-ID (MM)	GRÖSSTE OG SONDE	VE
192030	195030	3	30–50 kg	60 cm H ₂ O	6,5	16 Fr.	10
192040	195040	4	50–70 kg	60 cm H ₂ O	7,5	18 Fr.	
192050	195050	5	70–100 kg	60 cm H ₂ O	7,5	18 Fr.	
ETT = ENDOTRACHEALTUBUS OG = OROGASTRICHE SONDE							

* LMA® Protector nur mit Cuff Pilot-Technologie.

**Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.

LMA® Supreme Airway

Die LMA® Supreme ist eine Atemwegshilfe der zweiten Generation mit Magenzugang und einer effektiven oropharyngealen (First Seal) und ösophagealen Abdichtung (Second Seal).

Die ösophageale Abdichtung (Second Seal) kann leicht hergestellt und verifiziert werden, wodurch die Sicherheit erhöht und ein neuer Versorgungsstandard für Routineverfahren und erweiterte Verfahren geboten wird.



First Seal
(oropharyngeale
Abdichtung)

Second Seal
(ösophageale
Abdichtung)



First Seal

Die LMA® Supreme bietet oropharyngeale Leckagedrücke von durchschnittlich 37 cm H₂O.¹

Second Seal

Die LMA® Supreme ermöglicht die passive Drainage oder das aktive Management von Inhalt im Verdauungstrakt unabhängig von der Beatmung.

Laryngealmaske mit Drainageschlauch

Aus PVC

Die LMA® Supreme ist ein Einwegprodukt der zweiten Generation mit Magenzugang, das eine wirksame erste Abdichtung (First Seal) mit dem Oropharynx (oropharyngeale Abdichtung) und eine innovative zweite Abdichtung (Second Seal) mit dem oberen Ösophagussphinkter (die ösophageale Abdichtung) bildet.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



LMA® Supreme Airway

ART.-NR.	GRÖSSE DER MASKE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)*	GRÖSSTE OG-SONDE	VE
175010	1	Neugeborene/Kleinkinder bis 5 kg	5 ml	6 Fr.	10
175015	1,5	Kleinkinder 5–10 kg	8 ml	6 Fr.	
175020	2	Kleinkinder 10–20 kg	12 ml	10 Fr.	
175025	2,5	Kinder 20–30 kg	20 ml	10 Fr.	
175030	3	Kinder 30–50 kg	30 ml	14 Fr.	
175040	4	Erwachsene 50–70 kg	45 ml	14 Fr.	
175050	5	Erwachsene 70–100 kg	45 ml	14 Fr.	

1. Van Zundert A, Brimacombe J. The LMA Supreme – a pilot study. *Anaesthesia*. 2008;63(2):209-210.


LMA® ProSeal Airway

Laryngealmaske mit Drainageschlauch

Aus Silikon

Die LMA® ProSeal ist eine wiederverwendbare Laryngealmaske der zweiten Generation mit Magenzugang, die eine wirksame erste Abdichtung (First Seal) mit dem Oropharynx (oropharyngeale Abdichtung) und eine innovative zweite Abdichtung (Second Seal) mit dem oberen Ösophagussphinkter (die ösophageale Abdichtung) bildet.

- Latexfrei
- Wiederverwendbar

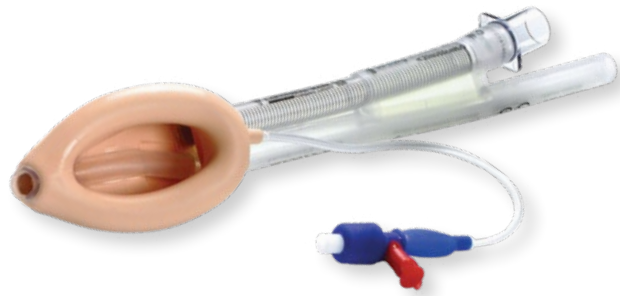

LMA® ProSeal Airway

ART.-NR.	GRÖSSE DER MASKE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)*	GRÖSSTE OG-SONDE	VE
150010	1	Neugeborene/Kleinkinder bis 5 kg	4 ml	2,7 mm/8 Fr.	1
150015	1,5	Kleinkinder 5–10 kg	7 ml	3,5 mm/10 Fr.	
150020	2	Kleinkinder 10–20 kg	10 ml	3,5 mm/10 Fr.	
150025	2,5	Kinder 20–30 kg	14 ml	4,9 mm/14 Fr.	
150030	3	Kinder 30–50 kg	20 ml	5,5 mm/16 Fr.	
150040	4	Erwachsene 50–70 kg	30 ml	5,5 mm/16 Fr.	
150050	5	Erwachsene 70–100 kg	40 ml	6,0 mm/18 Fr.	

OG = orogastrisch

*Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

**Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.

LMA® Unique (Silicone Cuff) Airway

LMA® Unique (Silicone Cuff) Airway

erhältlich mit Cuff Pilot-Technologie

Diese Laryngealmaske bietet die Vorteile einer Mehrwegmaske (Weichheit, Flexibilität) und minimiert gleichzeitig die mit einer Resterilisation einhergehenden Infektionsrisiken.

- Silikon-Cuff
- PVC-Tubus
- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



LMA® Unique (Silicone Cuff) Airway

ART.-NR. MIT CUFF PILOT- TECHNOLOGIE	ART.-NR. MIT KONTROLLBALLON	GRÖSSE DER MASKE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)*	VE
105200-000010	105300-000010	1	Neugeborene/Kleinkinder bis 5 kg	4 ml	10
105200-000015	105300-000015	1,5	Kleinkinder 5–10 kg	7 ml	
105200-000020	105300-000020	2	Kleinkinder/Kinder 10–20 kg	10 ml	
105200-000025	105300-000025	2,5	Kinder 20–30 kg	14 ml	
105200-000030	105300-000030	3	Kinder 30–50 kg	20 ml	
105200-000040	105300-000040	4	Erwachsene 50–70 kg	30 ml	
105200-000050	105300-000050	5	Erwachsene 70–100 kg	40 ml	
105200-000060	105300-000060	6	Große Erwachsene über 100 kg	50 ml	

*Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen. **Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.

LMA® Unique PreCurved Airway

Anatomisch gebogene Laryngealmaske

erhältlich mit Cuff Pilot-Technologie

Die LMA® Unique PreCurved mit Cuff Pilot-Technologie ist ein Produkt der ersten Generation mit anatomisch gebogenem Beatmungstubus für maximale Erfolgsraten beim Einführen. Der weiche Silikon-Cuff erlaubt ein sanftes Einführen und eine gute Abdichtung an der Schleimhaut, auch bei nur geringem Druck.

- Silikon-Cuff
- PVC-Tubus
- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



LMA® Unique PreCurved

ART.-NR. MIT CUFF PILOT- TECHNOLOGIE	ART.-NR. MIT KONTROLLBALLON	GRÖSSE DER MASKE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)*	VE
142010	145010	1	Neugeborene/Kleinkinder bis 5 kg	4ml	10
142015	145015	1,5	Kleinkinder 5–10 kg	7ml	10
142020	145020	2	Kleinkinder 10–20 kg	10ml	10
142025	145025	2,5	Kinder 20–30 kg	14ml	10
142030	145030	3	Erwachsene 30–50 kg	20ml	10
142040	145040	4	Erwachsene 50–70 kg	30ml	10
142050	145050	5	Erwachsene 70–100 kg	40ml	10

*Diese Maximalwerte sollten niemals überschritten werden. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Cuffinnendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.

LMA® Unique Airway



Laryngealmaske

Aus PVC

Die LMA® Unique ist eine vielseitige Laryngealmaske der ersten Generation für den Einmalgebrauch, die routinemäßig bei operativen Eingriffen eingesetzt wird und über Öffnungsstege verfügt.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

LMA® Unique Airway

LMA

ART.-NR.	GRÖSSE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)*	VE
125010	1	Neugeborene/Kleinkinder bis 5 kg	4 ml	10
125015	1,5	Kleinkinder 5–10 kg	7 ml	
125020	2	Kleinkinder/Kinder 10–20 kg	10 ml	
125025	2,5	Kinder 20–30 kg	14 ml	
125030	3	Kinder 30–50 kg	20 ml	
125040	4	Erwachsene 50–70 kg	30 ml	
125050	5	Erwachsene 70–100 kg	40 ml	

*Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen. **Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.

Ultimate T-Bag



Medizinprodukt zur Sauerstoffapplikation

- Zuverlässige FiO₂-Konzentrationen von 70 % bei 6 l/min und 50 % bei 3 l/min.
- Fasst ca. 300 ml Sauerstoff in seinem Reservoir
- Keine signifikante Rückatmung
- Kontrolle der Atmung durch die Bewegung des T-Bag
- Zum Einmalgebrauch
- Leicht
- Latexfrei

Ultimate T-Bag zur Sauerstoffanreicherung

ART.-NR.	VE
105230-000010	100



LMA® Flexible SU

Laryngealmaske

Aus PVC, flexibler Tubus.

Das Design der LMA® Flexible ermöglicht, dass der Tubus aus dem Operationsbereich verlegt werden kann, ohne dass sich der Cuff verschiebt oder die Abdichtung für den Anästhesisten verloren geht. Die LMA® Flexible fungiert als Barriere und verhindert eine Kontamination der Glottis oder Trachea durch Blut oder Sekret von oben.¹

Die LMA® Flexible ermöglicht Operationen in Mund und Rachen mit allen Vorteilen eines durch eine Laryngealmaske gesicherten Atemweges.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

LMA® Flexible PreCurved Airway

Für Stabilität im Pharynx und Flexibilität im Mund

- Einfaches, fingerfreies Einführen
- Extra lang für eine einfache Platzierung des Beatmungsschlauchs
- Der Silikon-Cuff ist weich und flexibel und passt sich der Anatomie für eine effektive oropharyngeale Abdichtung an.^{1,2}
- Atemwegstubus aus Silikon
- Cuff Pilot-Ventil für kontinuierliche Drucküberwachung auf einen Blick
- Silikon-Cuff
- Silikontubus
- MRT-fähig
- Latexfrei
- Ohne Phthalate hergestellt
- Steril
- Einmalgebrauch



LMA® Flexible Airway

ART.-NR.	GRÖSSE DER MASKE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)*	AD**	VE
115020	2	Kleinkinder/Kinder 10–20 kg	10 ml	8,80 mm	10
115025	2,5	Kinder 20–30 kg	14 ml	9,70 mm	
115030	3	Kinder 30–50 kg	20 ml	11,00 mm	
115040	4	Erwachsene 50–70 kg	30 ml	11,00 mm	
115050	5	Erwachsene 70–100 kg	40 ml	12,50 mm	

* Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.

** Außendurchmesser

1. Ahmed MZ, Vohra A. The reinforced laryngeal mask airway (RLMA) protects the airway in patients undergoing nasal surgery – an observational study of 200 patients. *Can J Anesth.* 2002;49(8):863-866.



LMA® Flexible PreCurved mit Cuff Pilot-Technologie

ART.-NR.	GRÖSSE DER MASKE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT IN ML)*	VE
1B2020	2	Kleinkinder/Kinder 10–20 kg	10	10
1B2025	2,5	Kinder 20–30 kg	14	10
1B2030	3	Kinder 30–50 kg	20	10
1B2040	4	Erwachsene 50–70 kg	30	10
1B2050	5	Erwachsene 70–100 kg	40	10

1. Eschertzhuber S, Brimacombe J †, Hohlrieder M, Keller C. Anaesthesia. 2009;64(1):79-83.
2. Jagannathan N, Sohn LE, Sawardekar A, Gordon J, Langen KE, Anderson K. Anaesthesia. 2012;67(6):632-639.

LMA® Classic Airway

Die Original-Laryngealmaske Aus Silikon

Die LMA® Classic ist die erste Laryngealmaske, die auf dem Gesundheitsmarkt eingeführt wurde, und damit das Original. Die LMA® Classic ist eine vielseitige und wiederverwendbare Laryngealmaske der ersten Generation mit Öffnungsstegen, die routinemäßig bei operativen Eingriffen eingesetzt wird.

- Latexfrei
- Wiederverwendbar



LMA® Classic Airway

ART.-NR.	GRÖSSE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)*	VE
100010	1	Neugeborene/Kleinkinder bis 5 kg	4 ml	1
100015	1,5	Kleinkinder 5–10 kg	7 ml	
100020	2	Kleinkinder/Kinder 10–20 kg	10 ml	
100025	2,5	Kinder 20–30 kg	14 ml	
100030	3	Kinder 30–50 kg	20 ml	
100040	4	Erwachsene 50–70 kg	30 ml	
100050	5	Erwachsene 70–100 kg	40 ml	
100060	6	Erwachsene über 100 kg	50 ml	

*Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen.
Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.

LMA® Flexible Airway

Laryngealmaske Aus Silikon, mit flexiblem Tubus

- Latexfrei
- Wiederverwendbar



LMA® Flexible Airway

ART.-NR.	GRÖSSE DER MASKE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)*	AD**	VE
110020	2	Kleinkinder/Kinder 10–20 kg	10 ml	8,25 mm	1
110025	2,5	Kinder 20–30 kg	14 ml	9,70 mm	
110030	3	Kinder 30–50 kg	20 ml	11,00 mm	
110040	4	Erwachsene 50–70 kg	30 ml	11,00 mm	
110050	5	Erwachsene 70–100 kg	40 ml	12,50 mm	
110060	6	Große Erwachsene über 100 kg	50 ml	12,50 mm	

* Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen.
Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.


** Außendurchmesser

LMA® Gastro Airway

Laryngealmaske mit Cuff Pilot-Technologie

Aus Silikon mit Cuff Pilot-Technologie

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

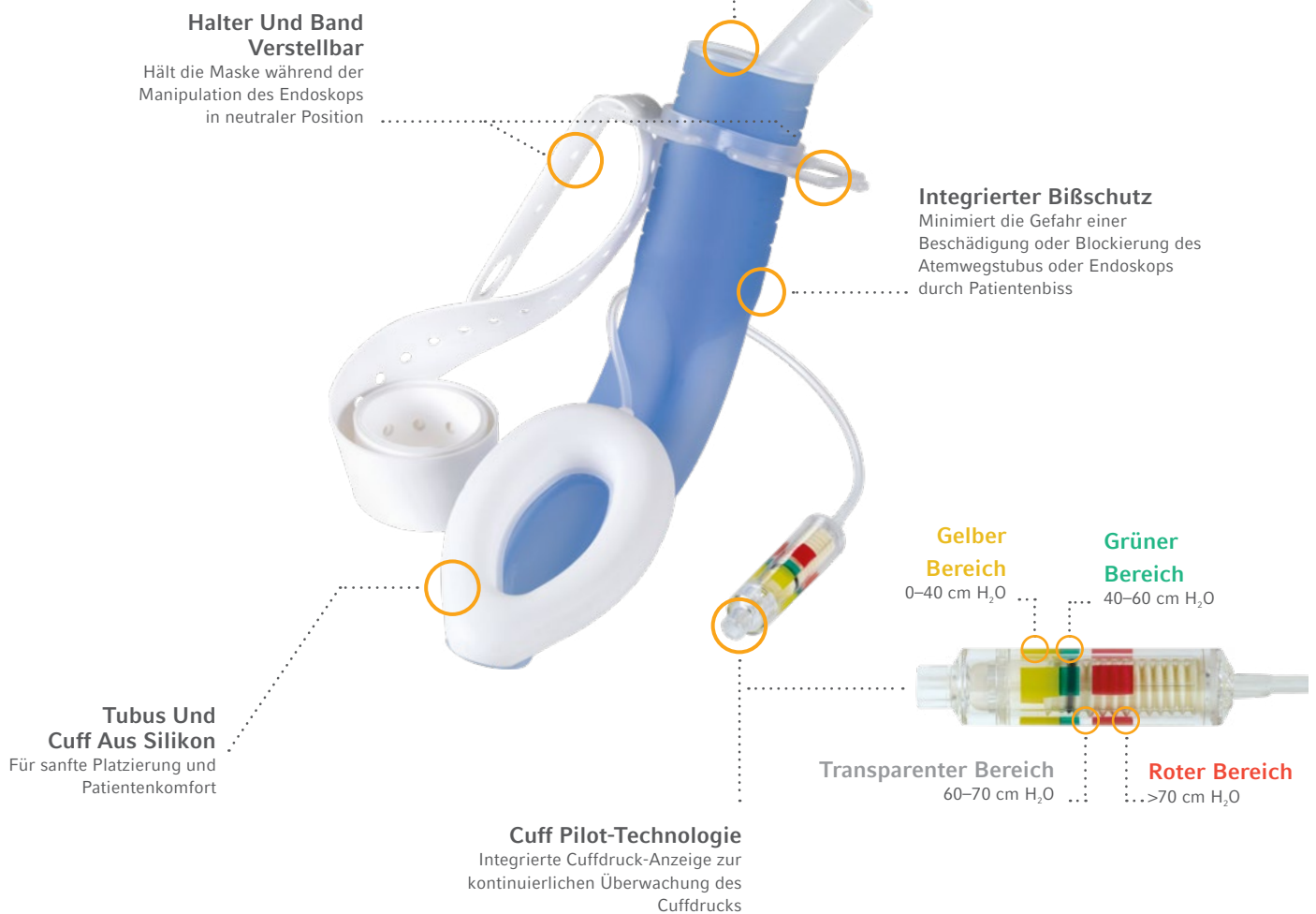

LMA® Gastro Mit Cuff Pilot-Technologie – Kurzinfo

Zur Kontrolle der Atemwege des Patienten bei direktem Zugang zur Speiseröhre und zum oberen gastrointestinalen Trakt im Rahmen einer Endoskopie.

In einer ersten Studie mit 292 Patienten waren die Applikation der LMA® Gastro und die Einführung des Endoskops bei 99 % der Patienten erfolgreich.¹¹

Die LMA® Gastro ermöglicht die Überwachung des endtidalen CO₂ für mehr Sicherheit des Patienten während des Eingriffs.



LMA® Gastro mit Cuff Pilot-Technologie

ART.-NR.	GRÖSSE DER MASKE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFF-INNENDRUCK [†]	MAX. ENDOSKOPGRÖSSE (AD)	VE
1E5030	3	30–50 kg	60 cm H ₂ O	14 mm	10
1E5040	4	50–70 kg	60 cm H ₂ O	14 mm	
1E5050	5	70–100 kg	60 cm H ₂ O	14 mm	

* Empfohlener Cuffdruck für Cuff Pilot-Technologie: grüner Druckbereich = 40–60 cm H₂O für alle Größen.
Hinweis: Die LMA® Gastro ist nicht für Intubationen geeignet.

Proaktives Atemwegsmanagement bei Endoskopien

Separater Magen- und Atemwegszugang

Hypoxämie aufgrund von Atemdepression oder Atemwegsobstruktion ist ein bekanntes Risiko im Zusammenhang mit endoskopischen Verfahren; laut Studien kann Hypoxämie in 11 bis 50 % der Fälle auftreten.^{1–3} Die LMA® Gastro mit Cuff Pilot-Technologie von Teleflex ist die erste Laryngealmaske, die speziell entwickelt wurde, um Ärzten ein proaktives Management der Atemwege des Patienten sowie einen direkten endoskopischen Zugang über den integrierten Endoskopkanal zu ermöglichen. Diese Laryngealmaske ermöglicht die Überwachung des endtidalen CO₂ für zusätzliche Sicherheit des Patienten.

Für zusätzliche Sicherheit der Patienten

Die Einweg-Laryngealmaske LMA® Gastro ist für größtmöglichen Patientenkomfort ausgelegt. Der weiche, flexible Silikon-Cuff passt sich an die Anatomie des Patienten an und sorgt für eine effektive oropharyngeale Abdichtung.^{4, 5} Silikon-Cuffs reduzieren nachweislich das Risiko von Halsschmerzen⁶, und es lassen sich höhere Dichtigkeiten⁴ als mit PVC-Cuffs erzielen.

Integrierte Cuff Pilot-Technologie

Bei der Cuff Pilot-Technologie handelt es sich um eine Cuffdruck-Anzeige, die den Cuffdruck kontinuierlich überwacht und Änderungen aufgrund von Schwankungen der Temperatur und der Lachgaskonzentration sowie Bewegungen im Atemweg auf einen Blick erkennbar macht. Die Cuff Pilot-Technologie wurde speziell entwickelt, um die bekannten Risiken einer Cuff-Hyperinflation, u. a. Halsschmerzen, Dysphagie, erhöhtes Aspirationsrisiko, aufgrund von Leckagen um den Cuff sowie Lähmungen des Nervus hypoglossus, des Nervus lingualis oder des Nervus laryngeus recurrens zu vermeiden.^{7–10}

1. Qadeer MA, Rocio Lopez A, Dumot JA, Vargo JJ. *Dig Dis Sci.* 2009;54(5):1035–1040.
2. Cote GA, Hovis RM, Ansstas MA, et al. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2010;8(2):137–142.
3. de Paulo GA, Martins FP, Macedo EP, Goncalves ME, Mourao CA, Ferrari AP. *Endosc Int Open.* 2015;3(1):E7–E13.
4. Maitra S, Khanna P, Baidya DK. *Eur J Anaesthesiol.* 2014;31(5):266–273.
5. Eschertzhuber S, Brimacombe J, Hohlrieder M, Keller C. *Anaesthesia.* 2009;64(1):79–83.[†]
6. Wong JG, Heaney M, Chambers NA, Erb TO, von Ungern-Sternberg BS. *Pediatr Anesth.* 2009;19(5):464–469.
7. van Zundert T, Brimacombe J. *Anesthesiol Intensive Ther.* 2012;44(2):63–70.[‡]
8. Burgard G, Mollhoff T, Prien T. *J Clin Anesth.* 1996;8(3):198–201.
9. Chantzara G, Stroumpoulis K, Alexandrou N, Kokkinos L, Iacovidou N, Xanthos T. *Minerva Anesthesiol.* 2014;80(5):547–555.
10. Seet E, Yousaf F, Gupta S, Subramanyam R, Wong DT, Chung F. *Anesthesiology.* 2010;112(3):652–657.[‡]
11. Terblanche NCS, Middleton C, Choi-Lundberg DL, Skinner M. *Br J Anaesth.* 2018;120(2):353–360.

[†] Von Teleflex Incorporated gesponserte Studie.

[‡] Von Teleflex Incorporated teilweise gesponserte Studie.

LMA® Fastrach SU

Intubations-Airway

Aus PVC

Die LMA® Fastrach wurde für erwartete oder unvorhergesehene schwierige Atemwegssituation sowie für die kardiopulmonare Reanimation entwickelt und bietet die Möglichkeit zur kontinuierlichen Beatmung und blinden Intubation. Der starre Griff des Produkts erleichtert das einhändige Einführen, Entfernen und Justieren zur Verbesserung der Oxygenierung und der Ausrichtung an der Glottis.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



LMA® Fastrach SU

ART.-NR.	GRÖSSE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)*	GRÖSSTER ETT-ID**						VE
				6,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm		
135130	3	Kinder 30–50 kg	20 ml	6,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	10	
135140	4	Erwachsene 50–70 kg	30 ml	6,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	10	
135150	5	Erwachsene 70–100 kg	40 ml	6,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	10	

LMA® Fastrach

Intubations-Airway

Aus Silikon

- Latexfrei
- Wiederverwendbar



LMA® Fastrach

ART.-NR.	GRÖSSE	GEWICHT DES PATIENTEN	MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)*	GRÖSSTER ETT-ID**						VE
				6,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm		
130030	3	Kinder 30–50 kg	20 ml	6,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	1	
130040	4	Erwachsene 50–70 kg	30 ml	6,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	1	
130050	5	Erwachsene 70–100 kg	40 ml	6,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	1	

* Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.

** Alle Größen (6, 6,5, 7, 7,5 und 8) des wiederverwendbaren LMA Fastrach ETT sind mit der LMA Fastrach und der LMA Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. Allerdings sind nur die Größen 6, 6,5 und 7 des LMA Fastrach ETT für den Einmalgebrauch mit der LMA Fastrach und der LMA Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel.

LMA® Fastrach ETT SU

Der LMA® Fastrach ETT ist ein Endotrachealtubus, der für Kompatibilität mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch entwickelt wurde.

LMA® Fastrach ETT SU

PVC-ETT mit Stabilisator

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

LMA® Fastrach ETT

LMA® Fastrach ETT


Silikon-ETT.

- Latexfrei
- Wiederverwendbar

LMA® Fastrach Stabilisator

100 % Silikon.

- Wiederverwendbar

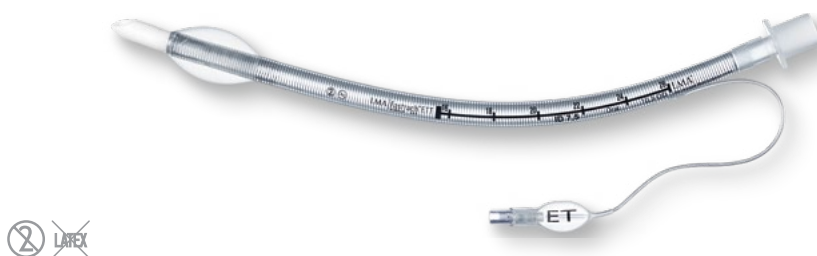

LMA® Fastrach ETT SU

ART.-NR.	TUBUSGRÖSSE**	VE
136060	6,0 mm	10
136065	6,5 mm	10
136070	7,0 mm	10
136075	7,5 mm	10
136080	8,0 mm	10

****Alle Größen (6, 6,5, 7, 7,5 und 8) des wiederverwendbaren LMA® Fastrach ETT sind mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. Allerdings sind nur die Größen 6, 6,5 und 7 des LMA® Fastrach ETT für den Einmalgebrauch mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel.**



LMA® Fastrach ETT

ART.-NR.	TUBUSGRÖSSE**	VE
131060	6,0 mm	1
131065	6,5 mm	1
131070	7,0 mm	1
131075	7,5 mm	1
131080	8,0 mm	1

****Alle Größen (6, 6,5, 7, 7,5 und 8) des wiederverwendbaren LMA® Fastrach ETT sind mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. Allerdings sind nur die Größen 6, 6,5 und 7 des LMA® Fastrach ETT für den Einmalgebrauch mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel.**




LMA® Fastrach Stabilisator

ART.-NR.	VE
130099	1

Cuff Pilot-Technologie

Integriertes CuffdruckMonitoring

Die LMA® Protector, die LMA® Unique (S), die LMA® Unique (Silikon-Cuff) und die LMA® Flexible (S) wurden mit der Cuff Pilot-Technologie konfiguriert – ein integrierter Einweg-Cuffdruck-Anzeiger, der den Cuffdruck kontinuierlich überwacht und so aus Schwankungen von Temperatur, Lachgaswerten und Bewegungen innerhalb des Atemwegs resultierende Veränderungen anzeigt. Dies liefert Feedback auf einen Blick und macht Sie auf Veränderungen aufmerksam, bevor diese die Patientensicherheit beeinträchtigen können. Die Cuff Pilot-Technologie wurde speziell entwickelt, um Ärzte bei der Vermeidung bekannter Risiken der Cuff-Hyperinflation zu unterstützen, darunter Halsschmerzen, Dysphagie, das erhöhte Aspirationsrisiko aufgrund von undichten Cuffs sowie hypoglossale, linguale oder wiederkehrende Laryngealnervenlähmungen wegen des auf die laryngealen und pharyngealen Strukturen ausgeübten Drucks.¹

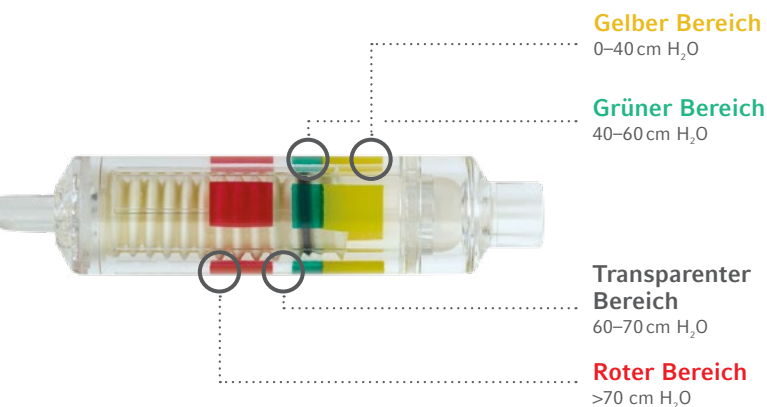

Vorteile des CuffdruckMonitorings

Ein optimaler Cuff-Innendruck von 40–60 cm H₂O ist wichtig, um eine zuverlässige Abdichtung mit einer Laryngealmaske erzielen zu können. Eine Über- oder Unterbefüllung des Cuffs kann das Risiko einer Aspiration erhöhen und Patienten dem Risiko einer ganzen Reihe von Folgeerkrankungen der Atemwege aussetzen.^{1–4}

Ein stabiler Cuff-Innendruck von ≤ 60 cm H₂O kann die Atemwegsmorbidität um bis zu 70 % senken.^{3–5}

Bis jetzt konnte einzig die Anwendung eines Manometers sicherstellen, dass der Cuff-Innendruck sich innerhalb des empfohlenen Bereichs von 40–60 cm H₂O befand. Dank der Cuff Pilot-Technologie bedarf es nun – über die gesamte Eingriffsdauer hinweg – nur noch eines prüfenden Blickes, um sich des optimalen Cuff-Innendrucks zu vergewissern.

Gelber Bereich

Während der Anwendung kann und wird sich der Balg nach Veränderungen des Cuffdrucks in die eine oder andere Richtung bewegen. Wenn die schwarze Markierung auf dem Balg in den gelben Bereich eintritt, zeigt dies einen möglichen Druckverlust bzw. eine Unterbefüllung an. Die normalerweise im gelben Bereich wahrgenommenen Druckmessungen reichen von 0 cm H₂O bis 40 cm H₂O.

Grüner Bereich

Der optimale Cuffdruck wird durch den grünen Bereich auf dem Cuff Pilot symbolisiert. Über den Cuff Pilot und eine Luftleitung wird Luft in den Cuff der Laryngealmaske gefüllt, bis die schwarze Markierung auf dem Blasebalg den grünen Bereich erreicht – dies bedeutet, dass der optimale Cuffdruck erreicht ist.

Transparenter Bereich

Der transparente Bereich zwischen Grün und Rot deutet darauf hin, dass der Druck bei etwa 60–70 cm H₂O liegt. Dies dient zur Optimierung der Patientensicherheit, da der Arzt auf eine mögliche beginnende Druckabweichung aufmerksam gemacht wird.

Roter Bereich

Wenn sich der Balg in den roten Bereich hinein bewegt, weist dies auf einen möglichen Anstieg des Cuffdrucks oder eine Überbefüllung hin. Der Druck im roten Bereich liegt normalerweise jenseits von 70 cm H₂O, und es wird empfohlen, dass dieser reduziert wird, bis die schwarze Markierung wieder zurück im grünen Bereich ist.

1. Van Zundert T, Brimacombe J. Comparison of cuff-pressure changes in silicone and PVC laryngeal masks during nitrous oxide anaesthesia in spontaneously breathing children. *Anaesthesiol Intensive Ther.* 2012;44(2):63–70.
2. Burgard G, Mollhoff T, Prien T. *J Clin Anesth.* 1996;8(3):198–201.
3. Chantzara G, Stroumpoulis K, Alexandrou N, Kokkinos L, Iacovidou N, Xanthos T. *Minerva Anesthesiol.* 2014;80(5):547–555.
4. Seet E, Yousaf F, Gupta S, Subramanyam R, Wong DT, Chung F. *Anesthesiology.* 2010;112(3):652–657.
5. Vasanth Karthik R, Ranganathan P, Kulkarni AP, Sharma KS. *J Anesth.* 2014;28(5):662–667.

Endotest

Cuffdruck-Messgerät



Rüsch Endotest


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
112700	Instrument zur Befüllung und Drucküberwachung für Niederdruck-Cuffs an Tracheal-, Tracheostomie- und Bronchialtuben sowie Laryngeal-masken • Mit Verbindungsschlauch	1
TM-230100 	Verbindungsschlauch aus PVC für Endotest Cuffdruck-Überwachungsinstrument • Transparent • Mit Luer-Verbindungsstück (Stecker und Kupplung) • Ca. 100 cm lang, 2 x 3 mm • Latexfrei • Steril	10

- „Der vom Trachealtubencuff auf die Mucosa ausgeübte Druck kann den kapillaren Perfusionsdruck übersteigen⁽¹⁻³⁾ und ist eine häufige Ursache für Morbidität bei intubierten Patienten“⁴.
- „Die Schätzungstechniken für die Cuff-Inflation sind unzureichend. Es müssen direkte Messungen (mit einem Manometer) durchgeführt werden.“⁵
- „Es sollten Cuffdruck-Manometer zum Einsatz kommen, um ein Übersteigen des vom Hersteller empfohlenen Cuff-Innendrucks, der mit einer erhöhten Patientenmorbidity verbunden sein kann, zu vermeiden.“⁶

1. Nordin U. The trachea and cuff induced tracheal injury. An experimental study on causative factors and prevention. *Acta Otolaryngol Suppl* (1977; 345: 1-71
2. Bunegin L, Albin MS, Smith RB. Canine tracheal blood flow after endotracheal tube cuff inflation during normotension and hypotension. *Anesth Analg* 1993; 76: 1083-90
3. Seegobin RD, van Hasselt GL. Endotracheal cuff pressure and tracheal mucosal blood flow: endoscopic study of effects of four large volume cuffs. *BMJ* 1984; 288: 965-8
4. Latto IP. The cuff. In: Latto IP, Rosen M, eds. *Difficulties in Tracheal Intubation*. London: Bailliere Tindall, 1984; 48-74
5. Stewart S, Secrest J, Norwood B, Zachary R. *AANA Journal*, 2003; 443: Vol 71 No 6
6. Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2015. *Anaesthesia* 2016; 71: 85-93.

Endotrachealtuben

Rüsch Guardian Endotrachealtubus mit subglottischer Absaugung

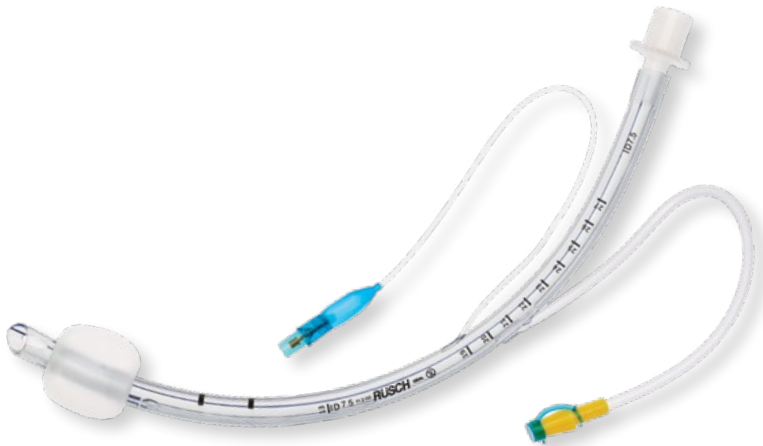

Transparenter Trachealtubus

Aus DEHP-freiem PVC, mit großvolumigem Niederdruck-Cuff; Absaugleitung ermöglicht Absaugen von subglottischem Sekret.

Oral, 1 Auge (Murphy)
Größen: ID 6,0–9,0 mm

Halb aufgeschobener Konnektor, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen, glatte, atraumatische Spitze, durchgehende Röntgenlinie, Markierungsringe zur Kontrolle der Intubationstiefe, blauer Kontrollballon, graduiert.

- Latexfrei
- DEHP-frei
- Steril
- Einmalgebrauch

Rüsch Guardian Endotrachealtubus mit subglottischer Absaugung

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE BIS ZUM ABSAUGLUMEN	GESAMTLÄNGE DES TUBUS	VE
112091060	6,0 mm	9,0 mm	25 mm	175 mm	290 mm	10
112091065	6,5 mm	9,8 mm	25 mm	195 mm	300 mm	
112091070	7,0 mm	10,4 mm	26 mm	205 mm	310 mm	
112091075	7,5 mm	11,2 mm	26 mm	215 mm	320 mm	
112091080	8,0 mm	11,8 mm	28 mm	225 mm	330 mm	
112091085	8,5 mm	12,6 mm	28 mm	235 mm	340 mm	
112091090	9,0 mm	13,1 mm	28 mm	245 mm	350 mm	

Die effektive subglottische Absaugung bietet als Teil eines Protokolls eine zuverlässige Strategie zum Schutz vor VAP. Bei der maschinellen Beatmung sammeln sich Sekrete aus den oberen Atemwegen oberhalb des Cuffs des Endotrachealtubus an.

Studien haben gezeigt, dass diese Sekrete am Cuff vorbei in die unteren Atemwege eintreten und dort eine Pneumonie auslösen können.¹ Eine Drainage der subglottischen Sekrete hat sich als effektive Strategie bei der Verhinderung früh einsetzender VAP erwiesen.²

Kurzinfo Rüsch Guardian – ET-Tubus zur subglottischen Absaugung

Der dünnwandige, großvolumige Niederdruck-Cuff erzeugt eine schützende Abdichtung.

Das Absauglumen ermöglicht die Entfernung von Sekret, das sich oberhalb des Cuffs ansammelt.

Große röntgendichte Linie für bessere Sichtbarkeit und zur Gewährleistung einer korrekten Platzierung.

1 American Thoracic Society. Consensus Statement: Hospital Acquired Pneumonia in Adults: diagnosis, assessment of severity, initial antimicrobial therapy and preventative strategies. *Am J Respir Crit Care Med.* 1996;151:1711–1725. Coffman, H.M.S., Rees, C.J., Sievers, A.E.F. & Belafsky, P.C. (2008). Proximal suction tracheotomy tube reduces aspiration volume. In: *Otolaryngology-Head and Neck Surgery.* 2008; 138(4), 441–445.

2 Dezfulian C, Shojania K, Collard HR, Kim HM, Matthay MA, Saint S. Subglottic secretion drainage for preventing ventilator-associated pneumonia: a meta-analysis. *Am J Med* 2005; 118:11–18. Pearce M, Mujica Lopez KI, Rubin BK. In vitro evaluation of endotracheal tubes with intrinsic suction. *CHEST Journal.* 2010;138(4):863–869.

Ohio Medical Push-To-Set Intermittierendes Absauggerät

- Intermittierender und kontinuierlicher Vakuumregulator mit zwei Betriebsmodi.
- Präzise Einstellung des Vakuumdrucks (0–27 kPa/0–200 mmHg)
- Die intermittierende Durchflussrate kann von 0 bis 16 l/min. eingestellt werden und ist auf 8 l/min. voreingestellt.
- Messgerät mit im Dunklen sichtbarer Skala und Nadel
- 10 Jahre Herstellergarantie.



Abmessungen

16,51 x 7,1 x 12,19 cm

Gewicht

0,57 kg

Ohio Medical Push-To-Set

ART.-NR.	VERSION	VE
8732-1253-901	DIN	1
8731-1253-901	BS	1
8733-1253-901	Afnor	1
8732-2253-901	DIN mit Venturi-Backpack	1

Zubehör



Absaugbehälter

ART.-NR.	GRÖSSE	VE
MI361	250ml	40



Wandhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
HC053	Wandhalterung für Absaugbehälter	40



Hydrophober Absaugfilter

Reduziert eine Verunreinigung des Vakuumreglers durch Vermeidung von Flüssigkeitsübertritt

- Fungiert als Absperrvorrichtung bei Überlaufen
- PTFE-Filtermedien 1 µm
- 99,99 % Luftpartikelabscheidung bei 0,3 Mikron
- Durchflussrate: 30 SLPM bei 1 psiD



Hydrophober Einweg-Absaugfilter

ART.-NR.	VE
6730-0572-800	50

Super SafetyClear Trachealtubus


Transparenter Trachealtubus

Aus PVC, mit großvolumigem Niederdruck-Cuff

Nasal/oral
Größen: ID 2,5–10,0 mm

Halb aufgeschobener Konnektor, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen, gewölbte, glatte, atraumatische Spitze, durchgehende Röntgenlinie, schwarzer Markierungsring zur Kontrolle der Intubationstiefe, blauer Kontrollballon, graduert.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

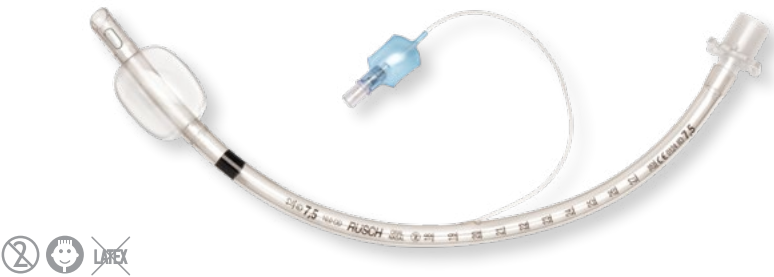

Rüsch Super SafetyClear Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE*	VE
112480 Magill	2,5 mm	4,0 mm	8,0 mm	160 mm	10
	3,0 mm	5,0 mm	8,0 mm	170 mm	
	3,5 mm	5,3 mm	8,0 mm	190 mm	
	4,0 mm	6,0 mm	10,5 mm	220 mm	
	4,5 mm	6,3 mm	10,5 mm	230 mm	
112482 Murphy, 1 Auge	5,0 mm	6,7 mm	13,0 mm	250 mm	
	5,5 mm	7,3 mm	16,5 mm	280 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	18,5 mm	290 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	20,5 mm	300 mm	
	7,0 mm	9,3 mm	24,0 mm	320 mm	
	7,5 mm	10,0 mm	26,0 mm	330 mm	
	8,0 mm	10,7 mm	26,0 mm	340 mm	
	8,5 mm	11,3 mm	28,0 mm	345 mm	
	9,0 mm	12,0 mm	28,0 mm	350 mm	
	9,5 mm	12,7 mm	29,0 mm	350 mm	
	10,0 mm	13,3 mm	29,0 mm	350 mm	

* Länge ohne Konnektor

Flexiset

Super Safety Clear Trachealtubus

Mit Murphy-Auge und FlexiSlip Einführungsmandrin.

Größen: ID 5,0–9,0 mm

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

Nur FlexiSlip Einführungsmandrin,
Art.-Nr. 503700 (siehe Seite 38)



Rüsch Flexiset

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE*	VE
112481	5,0 mm	6,7 mm	13,0 mm	250 mm	10
	5,5 mm	7,3 mm	16,5 mm	280 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	18,5 mm	290 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	20,5 mm	300 mm	
	7,0 mm	9,3 mm	24,0 mm	320 mm	
	7,5 mm	10,0 mm	26,0 mm	330 mm	
	8,0 mm	10,7 mm	26,0 mm	340 mm	
	8,5 mm	11,3 mm	28,0 mm	345 mm	
	9,0 mm	12,0 mm	28,0 mm	350 mm	

* Länge ohne Konnektor

Bei der Bestellung bitte immer Art.-Nr. und Bestellgröße angeben

Sheridan/CF Trachealtubus

Eng anliegender Niederdruck-Cuff

Nasal/oral, 1 Auge (Murphy)

Größen: ID 3,0–10,0 mm

Der undurchsichtige, eng anliegende Niederdruck-Cuff erleichtert die Intubation bei verbesserter Sichtbarkeit und ist ideal für Kurzzeitintubationen

- Latexfrei
- Steril



Sheridan/CF Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE	VE
CF Murphy Auge					10
5-10106	3,0 mm	4,2 mm	7,3 mm	160 mm	
5-10107	3,5 mm	4,9 mm	8,9 mm	181 mm	
5-10108	4,0 mm	5,5 mm	8,9 mm	200 mm	
5-10109	4,5 mm	6,2 mm	11,0 mm	221 mm	
5-10110	5,0 mm	6,8 mm	13,0 mm	241 mm	
5-10111	5,5 mm	7,5 mm	16,0 mm	271 mm	
5-10112	6,0 mm	8,2 mm	16,0 mm	281 mm	
5-10113	6,5 mm	8,9 mm	19,0 mm	291 mm	
5-10114	7,0 mm	9,6 mm	19,0 mm	313 mm	
5-10115	7,5 mm	10,2 mm	24,0 mm	324 mm	
5-10116	8,0 mm	10,9 mm	24,0 mm	330 mm	
5-10117	8,5 mm	11,5 mm	27,0 mm	330 mm	
5-10118	9,0 mm	12,2 mm	27,0 mm	330 mm	
5-10119	9,5 mm	12,9 mm	26,0 mm	321 mm	
5-10120	10,0 mm	13,5 mm	27,0 mm	321 mm	

Sheridan/HVT Trachealtubus

Konischer großvolumiger Niederdruck-Cuff

Nasal/oral, 1 Auge (Murphy)

Größen: ID 5,0–10,0 mm

Der konische, großvolumige Cuff mit großem Durchmesser bietet eine optimale tracheale Wandabdichtung. Der konische Cuff erhöht die Sichtbarkeit der Stimmbänder während der Intubation.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Sheridan/HVT Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE	VE
5-10310	5,0 mm	6,8 mm	16,0 mm	241 mm	10
5-10311	5,5 mm	7,5 mm	19,0 mm	271 mm	
5-10312	6,0 mm	8,2 mm	22,0 mm	281 mm	
5-10313	6,5 mm	8,9 mm	24,0 mm	291 mm	
5-10314	7,0 mm	9,6 mm	26,0 mm	313 mm	
5-10315	7,5 mm	10,2 mm	27,0 mm	324 mm	
5-10316	8,0 mm	10,9 mm	28,0 mm	330 mm	
5-10317	8,5 mm	11,5 mm	28,0 mm	330 mm	
5-10318	9,0 mm	12,2 mm	29,0 mm	330 mm	
5-10320	10,0 mm	13,5 mm	29,0 mm	321 mm	

SafetyClear Plus Trachealtubus

Transparenter Trachealtubus

Aus PVC, mit großvolumigem Super Plus Niederdruck-Cuff

Nasal/oral, 1 Auge (Murphy)
Größen: ID 5,0–10,0 mm

Halb aufgeschobener Konnektor, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen, gewölbte, glatte, abgerundete Spitze, durchgehende Röntgenlinie, schwarzer Markierungsring zur Kontrolle der Intubationstiefe, blauer Kontrollballon, graduiert.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

Super Safety Silk Trachealtubus

Trachealtubus

Aus DEHP-freiem PVC mit großvolumigem Niederdruck-Cuff.

Nasal/oral
Größen: ID 3,0–10,0 mm

Gewebefreundliches, thermosensibles Material, besonders vorteilhaft bei Langzeitintubation weiche, glatte Spitze, durchgehende Röntgenlinie, halb aufgeschobener Konnektor, Niederdruck-Abdichtung, Safety Silk Oberfläche, schwarzer Ring für Intubations-Tiefenvisualisierung.


- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch
- DEHP-frei



Rüsch SafetyClear Plus Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE*	VE
112082 Murphy, 1 Auge	5,0 mm	6,7 mm	20 mm	250 mm	10
	5,5 mm	7,3 mm	20 mm	280 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	24 mm	290 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	24 mm	300 mm	
	7,0 mm	9,3 mm	28 mm	320 mm	
	7,5 mm	10,0 mm	28 mm	330 mm	
	8,0 mm	10,7 mm	30 mm	340 mm	
	8,5 mm	11,3 mm	30 mm	345 mm	
	9,0 mm	12,0 mm	34 mm	350 mm	
	9,5 mm	12,7 mm	34 mm	350 mm	
	10,0 mm	13,3 mm	34 mm	350 mm	

* Länge ohne Konnektor

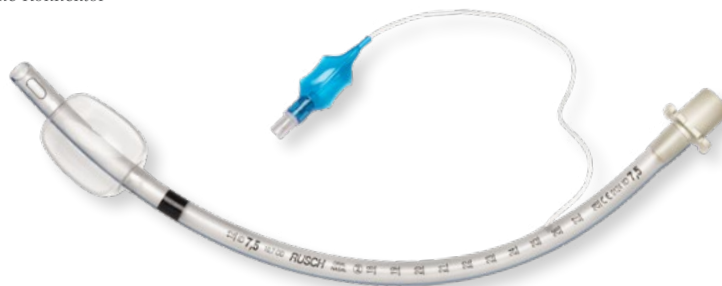

Rüsch Super Safety Silk Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE 112682	LÄNGE 112680	VE
112682 Murphy, 1 Auge Größen: ID 3,0–10,0 mm	3,0 mm	5,3 mm	8,0 mm	170 mm		10
	3,5 mm	6,0 mm	10,5 mm	190 mm		
	4,0 mm	6,3 mm	10,5 mm	220 mm		
	4,5 mm	6,7 mm	13,0 mm	230 mm		
112680 Magill Größen: ID 5,0–10,0 mm	5,0 mm	7,3 mm	16,5 mm	250 mm	250 mm	
	5,5 mm	8,0 mm	18,5 mm	280 mm	280 mm	
	6,0 mm	8,7 mm	20,5 mm	290 mm	290 mm	
	6,5 mm	9,3 mm	24,0 mm	300 mm	300 mm	
	7,0 mm	10,0 mm	26,0 mm	320 mm	310 mm	
	7,5 mm	10,7 mm	26,0 mm	330 mm	320 mm	
	8,0 mm	11,6 mm	28,0 mm	340 mm	330 mm	
	8,5 mm	12,4 mm	28,0 mm	345 mm	340 mm	
	9,0 mm	13,0 mm	29,0 mm	350 mm	345 mm	
	9,5 mm	14,2 mm	29,0 mm	350 mm	350 mm	
	10,0 mm	15,0 mm	29,0 mm	350 mm	350 mm	

Bei der Bestellung bitte immer Art.-Nr. und Bestellgröße angeben

SafetyClear Trachealtubus

Transparenter Trachealtubus

Aus PVC ohne Cuff.

Nasal/oral

Größen: ID 2,0–10,0 mm

Halb aufgeschobener Konnektor,
eingezogene glatte Spitze,
durchgehende Röntgenlinie, graduiert,
Glottis-Tiefenmarkierung.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Rüsch SafetyClear Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	LÄNGE*	GLOTTIS-TIEFENMARKIERUNG	VE
100380 Magill Größen: ID 2,0–10,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	150 mm	20 mm	10
	2,5 mm	3,3 mm	160 mm	20 mm	
	3,0 mm	4,0 mm	170 mm	20 mm	
	3,5 mm	4,7 mm	190 mm	20 mm	
	4,0 mm	5,3 mm	210 mm	30 mm	
	4,5 mm	6,0 mm	230 mm	30 mm	
	5,0 mm	6,7 mm	250 mm	40 mm	
100382 Murphy, 1 Auge Größen: ID 2,0–7,0 mm	5,5 mm	7,3 mm	280 mm	40 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	290 mm	40 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	300 mm	40 mm	
	7,0 mm	9,3 mm	320 mm	40 mm	
	7,5 mm	10,0 mm	330 mm	40 mm	
	8,0 mm	10,7 mm	340 mm	40 mm	
	8,5 mm	11,3 mm	345 mm	40 mm	
	9,0 mm	12,0 mm	350 mm	40 mm	
	9,5 mm	12,7 mm	350 mm	40 mm	
	10,0 mm	13,3 mm	350 mm	40 mm	

*Länge ohne Konnektor

Trachealtubus ohne Cuff

Aus PVC, ohne Cuff.

Nasal/oral, 1 Auge (Murphy)

Größen: ID 2,0–7,0 mm

Angeschnitten (*) für orale Anwendung

Spezielle Tiefenmarkierungen an der distalen Spitze zeigen die Intubationstiefe an. Die glatte, gewölbte Spitze erleichtert die Intubation. Bei Körpertemperatur erhöht sich die Flexibilität des Endotrachealtubus und kann sich so besser der Anatomie anpassen.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Sheridan Trachealtubus ohne Cuff

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	LÄNGE	VE
5-10404	2,0 mm	2,9 mm	141 mm	10
5-10405	2,5 mm	3,6 mm	141 mm	
5-10406	3,0 mm	4,2 mm	160 mm	
5-10407	3,5 mm	4,9 mm	181 mm	
5-10408	4,0 mm	5,5 mm	200 mm	
5-10409	4,5 mm	6,2 mm	221 mm	
5-10410	5,0 mm	6,8 mm	241 mm	
5-10411	5,5 mm	7,5 mm	271 mm	
5-10412	6,0 mm	8,2 mm	281 mm	
5-10413	6,5 mm	8,9 mm	291 mm	
5-10414	7,0 mm	9,6 mm	313 mm	

RüschFlex Trachealtubus

Verstärkter, vorgeformter Trachealtubus

Gebogen, aus PVC mit großvolumigem Niederdruck-Cuff.

Nasal/oral
Größen: ID 3,5–10,0 mm

Eingeklebter weißer Konnektor, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen, röntgendicht, graduert, auch erhältlich mit integriertem FlexiSlip Mandrin (kann separat bestellt werden, Art.-Nr. 503700, weitere Details siehe Seite 38).

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Murphy, 1 Auge, Art.-Nr. 104202
Größe: ID 3,5–10,0 mm



Magill, mit FlexiSlip, Art.-Nr. 104204
Größen: ID 5,0–9,0 mm



RüschFlex Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	LÄNGE* MAGILL 104201/104203	LÄNGE* MURPHY 104202/104204	VE
104201 Magill Größen: ID 3,5–10,0 mm	3,5 mm	5,8 mm	228 mm	229 mm	5
	4,0 mm	6,3 mm	235 mm	237 mm	
	4,5 mm	6,8 mm	256 mm	259 mm	
104203 Magill mit FlexiSlip Größen: ID 5,0–9,0 mm	5,0 mm	7,3 mm	319 mm	321 mm	
	5,5 mm	7,8 mm	319 mm	322 mm	
	6,0 mm	8,4 mm	326 mm	329 mm	
	6,5 mm	9,0 mm	330 mm	334 mm	
	7,0 mm	9,6 mm	349 mm	352 mm	
	7,5 mm	10,2 mm	353 mm	356 mm	
	8,0 mm	10,8 mm	360 mm	364 mm	
104202 Murphy, 1 Auge Größen: ID 3,5–10,0 mm	8,5 mm	11,3 mm	384 mm	388 mm	
	9,0 mm	11,9 mm	393 mm	398 mm	
	9,5 mm	12,4 mm	394 mm	399 mm	
	10,0 mm	12,9 mm	395 mm	399 mm	

*Länge ohne Konnektor

Spiral-Flex verstärkter Trachealtubus

Konischer großvolumiger Niederdruck-Cuff.

Nasal/oral, mit Cuff


Größen: ID 5,0–9,0 mm

Reduziertes Abknicken dank des spiralförmigen Verstärkungsdrahts aus Edelstahl innerhalb der Tubuswand; 15-mm-Konnektor ist im Tubus verklebt, blauer Cuff.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

Mit Cuff, oral

Mit Cuff, gekürzte Länge für die orale Anwendung, mit verstärkter Schutzhülle zum Schutz vor Patientenbiss und Tubusverschluss; der Tubus zur oralen Anwendung verfügt über einen eingesetzten Sher-i-slip-Mandrin.

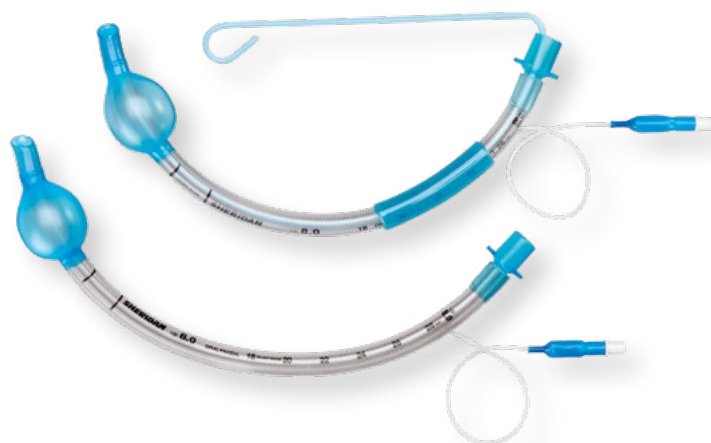

Sheridan Spiral-Flex verstärkter Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE	VE
Mit Cuff, oral					5
5-12510	5,0 mm	7,5 mm	19,0 mm	216 mm	
5-12511	5,5 mm	8,2 mm	22,0 mm	221 mm	
5-12512	6,0 mm	8,8 mm	24,0 mm	240 mm	
5-12513	6,5 mm	9,4 mm	26,0 mm	260 mm	
5-12514	7,0 mm	10,0 mm	27,0 mm	279 mm	
5-12515	7,5 mm	10,6 mm	28,0 mm	295 mm	
5-12516	8,0 mm	11,4 mm	28,0 mm	300 mm	
5-12517	8,5 mm	12,0 mm	29,0 mm	321 mm	
5-12518	9,0 mm	12,6 mm	29,0 mm	321 mm	
Mit Cuff, oral/nasal					5
5-12610	5,0 mm	7,5 mm	19,0 mm	246 mm	
5-12611	5,5 mm	8,2 mm	22,0 mm	276 mm	
5-12612	6,0 mm	8,8 mm	24,0 mm	286 mm	
5-12613	6,5 mm	9,4 mm	26,0 mm	297 mm	
5-12614	7,0 mm	10,0 mm	27,0 mm	306 mm	
5-12615	7,5 mm	10,6 mm	28,0 mm	318 mm	
5-12616	8,0 mm	11,4 mm	28,0 mm	327 mm	
5-12617	8,5 mm	12,0 mm	29,0 mm	327 mm	
5-12618	9,0 mm	12,6 mm	29,0 mm	327 mm	

Verstärkte Endotrachealtuben

Verstärkter Trachealtubus, gerade

Aus PVC, mit großvolumigem Niederdruck-Cuff.

Nasal/oral

Größen: ID 5,0–9,0 mm

Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen, röntgendicht, blauer Kontrollballon, graduiert, blauer aufgeschobener Konnektor für FO-Intubation.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Rüsch Verstärkter Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE*	VE
104000	5,0 mm	7,8 mm	17,5 mm	253,0 mm	2
	5,5 mm	8,3 mm	22,0 mm	253,5 mm	
	6,0 mm	8,8 mm	22,0 mm	313,5 mm	
	6,5 mm	9,3 mm	26,5 mm	313,5 mm	
	7,0 mm	9,8 mm	26,5 mm	314,0 mm	
	7,5 mm	10,3 mm	28,5 mm	314,0 mm	
	8,0 mm	10,8 mm	28,5 mm	314,0 mm	
	8,5 mm	11,3 mm	29,5 mm	354,0 mm	
	9,0 mm	11,8 mm	29,5 mm	354,5 mm	

*Länge ohne Konnektor

Spitze

Art.-Nr. 104000 ohne Konnektor für fiberoptische Intubation; kann zusammen mit einem Mainzer Universaladapter verwendet werden (siehe Seite 58).

Vorsicht:

Wir empfehlen, das Innere des Trachealtubus und das Äußere des Absaugkatheters vor dem Gebrauch mit Silkospray Universal Silikonspray (Art.-Nr. 556000, siehe Seite 56) einzusprühen.

Bronchoflex-Set

Verstärkter Trachealtubus mit zusätzlichem Sauerstofflumen

Aus PVC. Für die orale Intubation bei Verfahren wie z. B. der flexiblen Bronchoskopie, Biopsie und Kryobiopsie und zur zusätzlichen Sauerstoffzufuhr indiziert.

Aufgeschobener Konnektor, röntgendicht, ca. 33 cm lang, doppelummig, graduiert, silikonisiert, mit oder ohne Cuff.


- Steril
- Einmalgebrauch
- Latexfrei



Rüsch Bronchoflex-Set

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	GESAMT-AD	LÄNGE*	VE
104100	7,5 mm	10,2 mm	319 mm	1
Set-Bestandteile • Verstärkter Tracheal-/Einführungstubus aus PVC ohne Cuff • Sauerstoffschlauch aus PVC, ca. 110 cm lang • Kunststoff-Bisschutz mit Halteplatte • Halteband				

*Länge ohne Konnektor

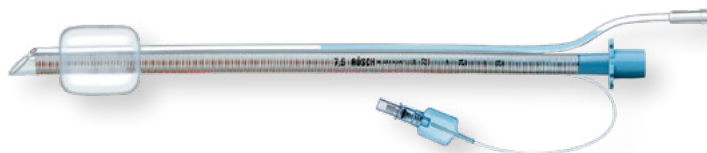

Rüsch Bronchoflex-Set

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	GESAMT-AD	LÄNGE*	VE
104103	8,5 mm	11,7 mm	359 mm	1
Set-Bestandteile • Verstärkter Tracheal-/Einführungstubus aus PVC mit großvolumigem Niederdruck-Cuff • Sauerstoffschlauch aus PVC, ca. 110 cm lang • Ventil für Luer-Lock-Spritzen				

*Länge ohne Konnektor

Bei der Bestellung bitte immer Art.-Nr. und Bestellgröße angeben

RüschFlex Spiral-Trachealtubus

RüschFlex Spiral-Trachealtubus, ohne Cuff

Nasal/oral
Größen: ID 2,5–6,5 mm

Aufgeschobener Konnektor, röntgendicht, graduiert.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



RüschFlex Spiral-Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	LÄNGE*	VE
103600	2,5 mm	4,1 mm	184,0 mm	2
	3,0 mm	4,8 mm	184,5 mm	
	3,5 mm	5,5 mm	184,5 mm	
	4,0 mm	6,0 mm	194,5 mm	
	4,5 mm	6,5 mm	198,0 mm	
	5,0 mm	7,2 mm	208,0 mm	
	5,5 mm	7,7 mm	208,0 mm	
	6,0 mm	8,2 mm	208,0 mm	
	6,5 mm	8,9 mm	268,5 mm	

*Länge ohne Konnektor

Spiral-Flex verstärkter Trachealtubus

Pädiatrischer verstärkter Trachealtubus, gebogen

Aus PVC, ohne Cuff.

Nasal/oral, Murphy-Auge
Größen: ID 3,0–5,0 mm

- Geklebter Konnektor
- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Sheridan Spiral-Flex verstärkter Trachealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	LÄNGE	VE
5-12906	3,0 mm	4,2 mm	160 mm	5
5-12907	3,5 mm	4,9 mm	181 mm	
5-12908	4,0 mm	5,5 mm	200 mm	
5-12909	4,5 mm	6,2 mm	221 mm	
5-12910	5,0 mm	6,8 mm	241 mm	

Nasaler Safety Silk

Transparenter, weicher, anatomisch geformter Tubus

Aus DEHP-freiem PVC mit großvolumigem Niederdruck-Cuff

Nur nasal, 1 Auge (Murphy)
Größen: ID 3,0–8,0 mm

Extrem weiches, gewebefreundliches PVC, besonders geeignet für Langzeitintubationen, geklebter Konnektor, knickstabil, gewölbte glatte Spitze, kontinuierliche blaue Röntgenlinie, graduert, mit Niederdruck-Cuff, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

AGT Trachealtubus Nasal


Transparenter, anatomisch geformter AGT-Tubus

Aus PVC, mit großvolumigem Niederdruck-Cuff.

Nur nasal, 1 Auge (Murphy)
Größen: ID 3,5–8,0 mm

Halb aufgeschobener Konnektor, eingezogene glatte Spitze, durchgehende Röntgenlinie, graduert, Niederdruck-Cuff, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen.


- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

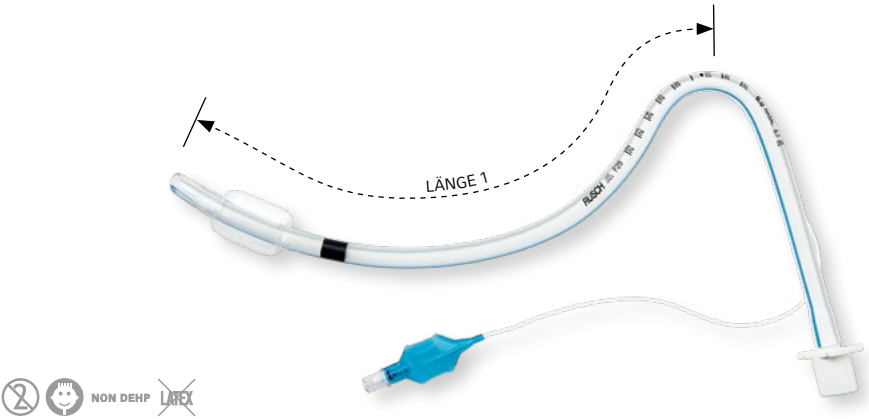

Rüsch nasaler Safety Silk

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE 1	GESAMTLÄNGE*	VE
111782	3,0 mm	5,3 mm	11,0 mm	150 mm	245 mm	10
	3,5 mm	6,0 mm	11,0 mm	170 mm	271 mm	
	4,0 mm	6,3 mm	13,0 mm	195 mm	303 mm	
	4,5 mm	6,7 mm	13,0 mm	230 mm	338 mm	
	5,0 mm	7,3 mm	16,0 mm	250 mm	358 mm	
	5,5 mm	8,0 mm	18,0 mm	260 mm	368 mm	
	6,0 mm	8,7 mm	20,0 mm	275 mm	415 mm	
	6,5 mm	9,3 mm	24,0 mm	280 mm	420 mm	
	7,0 mm	10,0 mm	26,0 mm	290 mm	430 mm	
	7,5 mm	10,7 mm	26,0 mm	305 mm	445 mm	
	8,0 mm	11,3 mm	28,0 mm	315 mm	455 mm	

*Länge ohne Konnektor

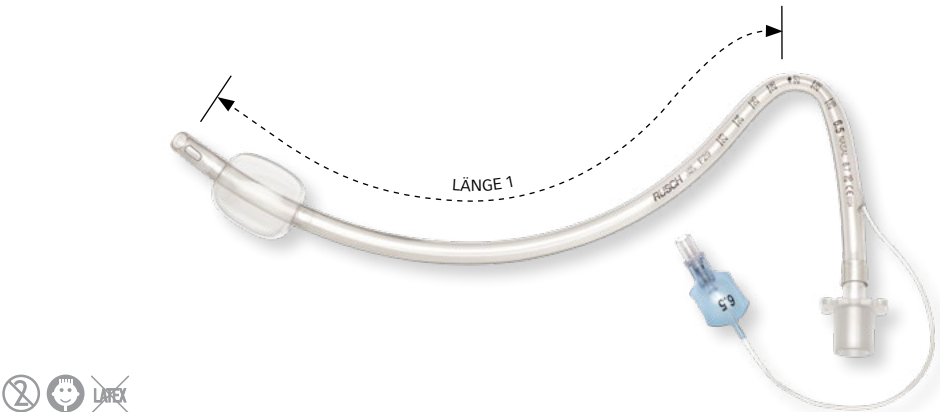

Rüsch AGT Trachealtubus, nasal

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE 1	GESAMTLÄNGE*	VE
111781	3,5 mm	5,3 mm	11 mm	160 mm	225 mm	10
	4,0 mm	6,0 mm	11 mm	185 mm	255 mm	
	4,5 mm	6,3 mm	13 mm	220 mm	295 mm	
	5,0 mm	6,7 mm	13 mm	235 mm	310 mm	
	5,5 mm	7,3 mm	16 mm	245 mm	325 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	18 mm	260 mm	345 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	20 mm	270 mm	355 mm	
	7,0 mm	9,3 mm	24 mm	280 mm	365 mm	
	7,5 mm	10,0 mm	26 mm	290 mm	375 mm	
	8,0 mm	10,7 mm	26 mm	300 mm	385 mm	

*Länge ohne Konnektor

Bei der Bestellung bitte immer Art.-Nr. und Bestellgröße angeben

AGT Trachealtubus Nasal

Transparenter, anatomisch geformter AGT-Tubus

Aus PVC ohne Cuff.

Nur nasal, 2 Augen (Murphy)

Größen: ID 3,0–6,5 mm

Halb aufgeschobener Konnektor, eingezogene glatte Spitze, durchgehende Röntgenlinie, graduierte Glottis-Tiefenmarkierung.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Rüsch AGT Trachealtubus, nasal

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	LÄNGE*	VE
100181	3,0 mm	4,0 mm	115 mm	10
	3,5 mm	4,7 mm	140 mm	
	4,0 mm	5,3 mm	155 mm	
	4,5 mm	6,0 mm	180 mm	
	5,0 mm	6,7 mm	190 mm	
	5,5 mm	7,3 mm	195 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	205 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	210 mm	

*Länge siehe Bild

Magill-Zange für den Einmalgebrauch

Zur Unterstützung der Intubation von vorgeformten nasal ET-Tuben

- Latexfrei
- Einmalgebrauch



Magill-Zange für den Einmalgebrauch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
503300-000150	Kleinkind	10
503300-000200	Kind	10
503300-000245	Erwachsener	10

AGT-Trachealtubus,
oral


Transparenter, anatomisch
geformter AGT-Tubus

Aus PVC, mit großvolumigem
Niederdruck-Cuff.

Oral, 1 Auge (Murphy)
Größen: ID 3,5–9,0 mm

Halb aufgeschobener Konnektor,
eingezogene glatte Spitze,
durchgehende Röntgenlinie, graduiert,
Niederdruck-Cuff, blauer Kontrollballon,
Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen.


- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

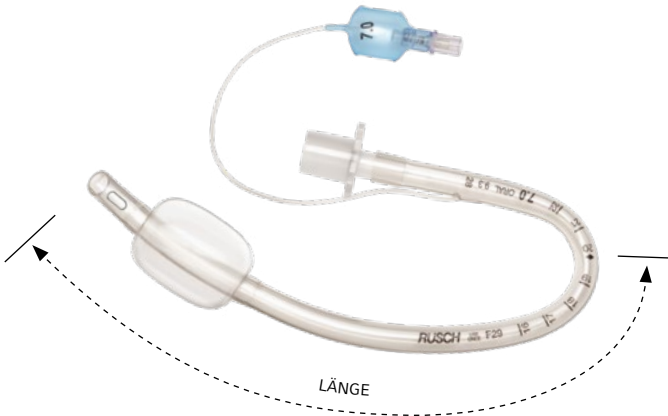

Rüsch AGT-Trachealtubus, oral

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE*	VE
111780	3,5 mm	5,3 mm	11 mm	120 mm	10
	4,0 mm	6,0 mm	11 mm	130 mm	
	4,5 mm	6,3 mm	13 mm	145 mm	
	5,0 mm	6,7 mm	13 mm	155 mm	
	5,5 mm	7,3 mm	16 mm	165 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	18 mm	180 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	20 mm	190 mm	
	7,0 mm	9,3 mm	24 mm	200 mm	
	7,5 mm	10,0 mm	26 mm	210 mm	
	8,0 mm	10,7 mm	26 mm	220 mm	
	8,5 mm	11,3 mm	28 mm	230 mm	
	9,0 mm	12,0 mm	28 mm	240 mm	

*Länge siehe Bild

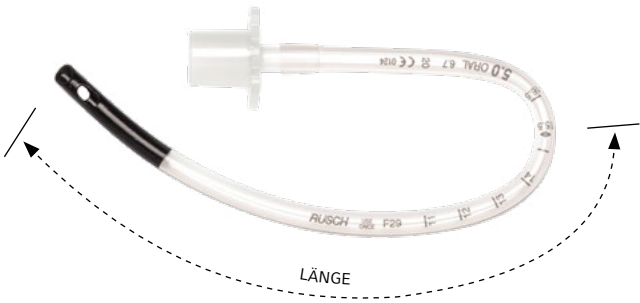

Rüsch AGT-Trachealtubus, oral

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	LÄNGE*	VE
100180	3,0 mm	4,0 mm	105 mm	10
	3,5 mm	4,7 mm	120 mm	
	4,0 mm	5,3 mm	130 mm	
	4,5 mm	6,0 mm	145 mm	
	5,0 mm	6,7 mm	155 mm	
	5,5 mm	7,3 mm	165 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	180 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	190 mm	
	7,0 mm	9,3 mm	200 mm	

*Länge siehe Bild

AGT-Trachealtubus,
oral

Transparenter, anatomisch
geformter AGT-Tubus

Aus PVC ohne Cuff.

Oral, 2 Augen (Murphy)
Größen: ID 3,0–7,0 mm

Halb aufgeschobener Konnektor,
eingezogene glatte Spitze,
durchgehende Röntgenlinie, graduierte
Glottis-Tiefenmarkierung.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

Transparenter Mikrolaryngealtubus

Aus PVC, mit großvolumigem Niederdruck-Cuff.

Oral/nasal

Größen: ID 4,0–6,0 mm

Geringer Tubusdurchmesser für Interventionen im Laryngealraum.

Halb aufgeschobener Konnektor, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen, durchgehende Röntgenlinie, blauer Kontrollballon, graduiert.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Rüsch Mikrolaryngealtubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE*	VE
112460	4,0 mm	6,0 mm	31 mm	360 mm	10
	5,0 mm	7,3 mm	31 mm	360 mm	
	6,0 mm	8,7 mm	31 mm	360 mm	

*Länge ohne Konnektor

Sheridan LTS-Tubus

Trachealtubus

Für mikrolaryngeale Trachealchirurgie.

Nasal/oral, 1 Auge (Murphy)

Größen: ID 4,0–6,0 mm

Der Tubus mit geringem Außendurchmesser ermöglicht einen besseren Zugang zum Operationsbereich, gleichzeitig aber ausreichende Beatmung des Patienten; gleiche Tubuslänge und gleicher Cuff-Durchmesser wie ein 8,0-mm-Trachealtubus mit Cuff. Der gelbe großvolumige PVC-Cuff ist besser sichtbar und ermöglicht eine Abdichtung gegenüber der Trachealwand mit Niederdruck.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Sheridan LTS-Tubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø	LÄNGE	VE
5-11108	4,0 mm	5,8 mm	35,0 mm	321 mm	10
5-11110	5,0 mm	7,1 mm	35,0 mm	321 mm	
5-11112	6,0 mm	8,5 mm	35,0 mm	321 mm	

Lasertubus



Vorgeformter Trachealtubus

Mit definiertem Laser-Resistenz aus weißem Weichgummi.

Zur Laserintervention im Laryngealraum.

Oral, 1 Auge (Murphy)

Größen: ID 4,0–8,0 mm


Eingeklebter weißer Konnektor, 2-Wege-Hähne mit Luer- und Luer-Lock-Ansatz und Verschlussmechanismus, eingezogene glatte Spitze, zwei ineinanderliegende Cuffs, zwei Kontrollballons, erhöhter Knickschutz, Laserschutzfolie 17 cm lang aus Merocel-Schaum und gewellter Silberfolie.

- Steril
- Einmalgebrauch

Rüsch-Lasertubus

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE / ID	AD	CUFF-Ø AUSSEN	CUFF-Ø INNEN	LÄNGE*	VE
102004	4,0 mm	8,0 mm	20 mm	20 mm	400 mm	2
	5,0 mm	9,0 mm	20 mm	20 mm	400 mm	
	6,0 mm	10,8 mm	24 mm	24 mm	400 mm	
	7,0 mm	12,3 mm	28 mm	28 mm	400 mm	
	8,0 mm	13,4 mm	28 mm	28 mm	400 mm	

**Länge ohne Konnektor*

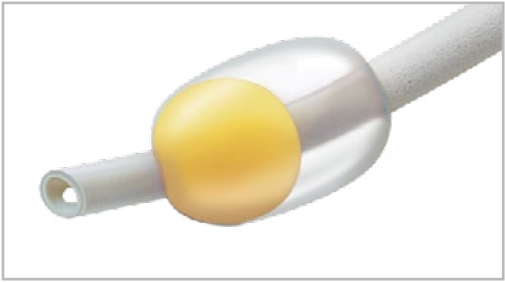

Vorsicht:
Diese Produkte enthalten Naturlatex, der allergische Reaktionen auslösen kann.

Tubuswechsler

Verlässliches Hilfsmittel für sanfte und sichere Platzierung



Endoguide Tubuswechsler und Einführhilfe in Einem

Permanent verfügbares großes Lumen für konstante Oxygenierung des Patienten, Konnektionssystem für 15-mm- und Luer-Lock-Konnektoren, Tiefenmarkierungen.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

Rüsch Endoguide-T

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	AD	LÄNGE*	VE
503100	2,5	2,6 mm	700 mm	1
	6,0	5,0 mm	830 mm	
503110	6,0	5,0 mm	525 mm	

*Länge ohne Konnektor



Konnektor-Set

- Luer-Lock-Konnektor
- Silikon-Konus
- 15-mm-Standardkonnektor

Mandrins

Verlässliches Hilfsmittel für sanfte und sichere Platzierung




FlexiSlip Einführungsmandrin

Flexibler Metallmandrin mit Kunststoffbeschichtung, glatter Oberfläche und gebogenem Griff für Trachealtuben.

- Abgerundete, weiche Spitze
- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

Rüsch FlexiSlip Einführungsmandrin

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	LÄNGE GEBOGEN	AD	FÜR TUBUSGRÖSSEN ID	VE
503700	10	335 mm	3,28 mm	3,5 mm	20
	12	366 mm	3,93 mm	4,0 mm	
	14	366 mm	4,60 mm	5,0 mm	

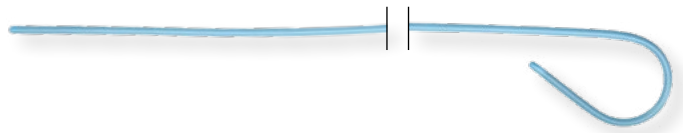

Sher-I-Slip Einführungsmandrin

Aufgrund seiner verlässlichen Stabilität behält dieser Mandrin während der oralen Intubation die erwünschte Krümmung bei; die blaue Farbe verbessert die Sichtbarkeit; das spezielle Material reduziert die Reibung zwischen Mandrin und Tubus; glattes, geformtes Spitzenende.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

Hudson Sher-I-Slip Einführungsmandrin

ART.-NR.	LÄNGE CA.	AD	FÜR TUBUSGRÖSSEN ID	VE
5-15101	340 mm	10 Fr.	5,0–10,0 mm	25
5-15102	250 mm	5 Fr.	2,0–4,5 mm	
5-15103	510 mm	10 Fr.	5,0–10,0 mm	



Soft-Tip Einführungsmandrin

Weiche Spitze zur Minimierung von Traumata; gleitfördernde Oberfläche ermöglicht einfache Insertion in den Endotrachealtubus.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

Hudson Soft-Tip Einführungsmandrin

ART.-NR.	LÄNGE CA.	AD	FÜR TUBUSGRÖSSEN ID	VE
5-15120	270 mm	6 Fr.	2,5–4,5 mm	20
5-15110	330 mm	10 Fr.	4,5–6,5 mm	
5-15100	310 mm	14 Fr.	6,0–10,0 mm	



Einführungsmandrin aus PVC

- Für Trachealtuben
- Flexibel
- Abgerundete, weiche Spitze
- Latexfrei
- DEHP-frei
- Unsteril

Rüsch Einführungsmandrin aus PVC

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	LÄNGE CA.	AD	FÜR ETT ID	VE
503000	15	350 mm	1,5 mm	2,0–2,5 mm	10
	20	410 mm	2,0 mm	2,5–3,0 mm	
	26	410 mm	2,6 mm	3,0–3,5 mm	
	33	460 mm	3,3 mm	3,5–4,5 mm	
	43	460 mm	4,3 mm	4,5–6,0 mm	
	56	510 mm	5,6 mm	ab 6,0 mm	

Bronchusblocker und Bronchialtuben

Sorgfältig ausgearbeitete Details für herausragende Leistung

Mit ihrer typischen qualitativ hochwertigen Verarbeitung wurden die Rüsch Endobronchialtuben entwickelt, um einen hohen Sicherheitsstandard zu bieten, bei dem der Patientenkomfort im Mittelpunkt steht. Dies wird durch spezielle Eigenschaften wie etwa die hochgradig flexiblen thermoplastischen Materialien, das markante Design des Bronchialcuffs bei rechtsseitigen Modellen sowie den weichen Carina-Haken (bei Carlens- und White-Ausführung) erreicht, die allesamt darauf abzielen, die empfindliche tracheale Mukosa zu schützen.

Dies gilt auch für unseren Rüsch EZ-Blocker, die nächste Generation bei Bronchusblockern.

Das Y-förmige Design ermöglicht eine intuitive, schnelle Platzierung der Cuffs und erlaubt eine sichere Verankerung des EZ-Blocker auf der Carina mit minimalem Risiko einer Dislokation. Dieses minimal-invasive Verfahren reduziert das Risiko einer Atemwegsverletzung und verbessert die Patientensicherheit.

Minimal invasiver Bronchusblocker der nächsten Generation, entwickelt zur Verbesserung des Behandlungsergebnisses beim Patienten

Innovativ

Der EZ-Blocker von Teleflex wurde von einem Anästhesisten für die Optimierung der Lungenisolation während der Anästhesie entwickelt. Der EZ-Blocker verfügt über ein Y-förmiges distales Ende, das der Bifurkation der Trachea nachempfunden ist.

Intuitiv

Durch das gegabelte distale Ende des EZ-Blocker können die Cuffs intuitiv im rechten oder linken Bronchus platziert werden. Sobald der EZ-Blocker das distale Ende eines einlumigen Endotrachealtubus passiert, trennen sich die gegabelten Cuffs und werden von selbst in den linken und rechten Hauptstammbronchus geleitet.

Sicher

Der EZ-Blocker sitzt sicher auf der Carina, ohne dass der Cuff in einen der beiden Bronchen navigiert werden muss. Mit dem EZ-Blocker kann die Befüllung des Cuffs unmittelbar vor der Lungenisolation durchgeführt werden, was die Notwendigkeit einer Manipulation des Katheters nach der Platzierung minimiert und das Risiko des Verrutschens des Cuffs verringert.¹



Die Verwendung des „Y“ bietet konkrete Vorteile:

Einfach:
Vereinfachte Durchführung
bilateralen Eingriffe


Schnell:
Intuitive Platzierung und
natürliche Ausrichtung der
Cuffs

Sicher:
Direkte Verankerung mit
minimalem Risiko einer
Dislokation während des
Eingriffes

Sicher:
Minimal invasiv für höhere
Patientensicherheit und
verringertes Risiko eines
Atemwegtraumas

Zuverlässig:
Zugelassen für den
Notfalleinsatz

1. Mungroop HE, Wai PTY, Morei MN, Loef BG, Epema AH. Lung isolation with a new Y-shaped endobronchial blocking device, the EZ-Blocker. *Br J Anaesth.* 2010;104(1):119–120.

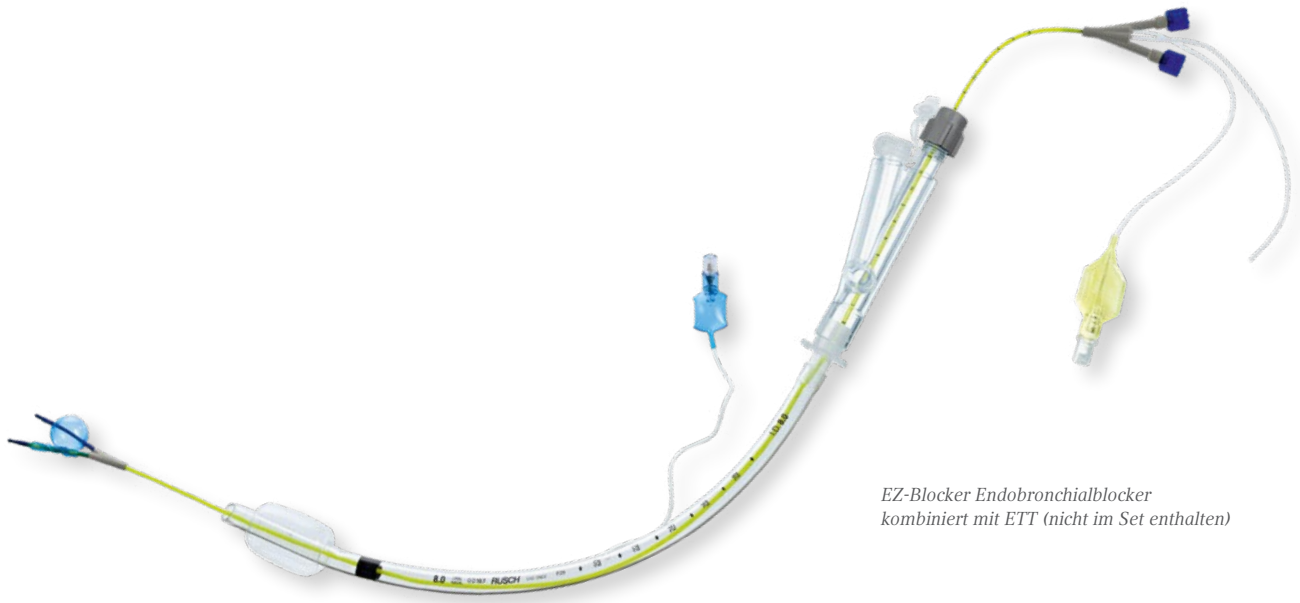

*EZ-Blocker Endobronchialblocker
kombiniert mit ETT (nicht im Set enthalten)*

EZ-Blocker-Set

Y-förmiger Endobronchialblocker

Für Lungenisolation und einseitige
Lungenbeatmung.

- Für Chirurgie mit fiberoptischen oder Video-Bronchoskopen.
- 75 cm lang, exakte Positionierung über einen Endotrachealtubus.
- Gegabeltes distales Ende, beide Seiten mit aufblasbarem Cuff und zentralem Lumen, farbkodiert, minimales Risiko einer Dislokation während des Eingriffs.
- Röntgendichter Schaft mit Tiefenmarkierungen, Cuffs aus Polyurethan.
- Der EZ-Multiport-Adapter erleichtert die Beatmung, die Platzierung des EZ-Blocker sowie die Einführung von fiberoptischen oder Video-Bronchoskopen und Absaugkathetern.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch
- DEHP-frei



Rüsch EZ-Blocker-Set

ART.-NR.	SET-BESTANDTEILE	LÄNGE	GRÖSSE	VE
MG-02770-002	1 EZ-Blocker Endobronchialblocker 1 EZ-Multiport-Adapter mit Doppelverschlusskappe 1 Sauerstoff-Adapter 2 Verschlusskappen	75 cm	7 Fr	1




Bronchopart Tubusset

Transparenter doppellumiger Bronchialtubus

Aus PVC

Halb aufgeschobene Konnektoren,
Ventile für Luer- und Luer-Lock-
Spritzen, durchgehende Röntgenlinie
und zusätzliche Cuff-Markierungen,
transparenter trachealer Niederdruck-
Cuff mit transparentem Kontrollballon,
blauer bronchialer Niederdruck-Cuff
mit blauem Kontrollballon, Mandrin zur
Formgebung mit Fixierung, graduiert

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

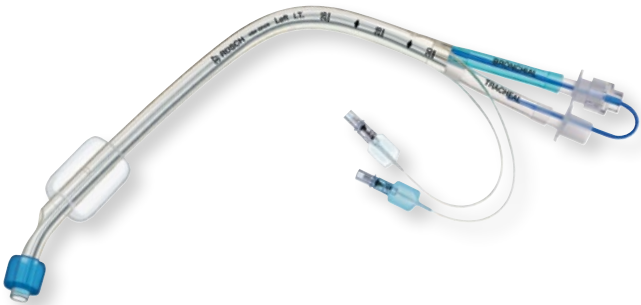

Rüsch Bronchopart-Tubusset

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	2 × ID	MAX. AD	CUFF-Ø BRONCHIAL	CUFF-Ø TRACHEAL	LÄNGE*	VE
116100 (Set)	Für linksseitige bronchiale Intubation						1
	26	3,40 mm	9,30 mm	15,0 mm	22 mm	280 mm	
	28	3,71 mm	10,02 mm	15,0 mm	22 mm	280 mm	
	35	4,26 mm	12,52 mm	16,5 mm	30 mm	300 mm	
	37	4,52 mm	13,24 mm	16,5 mm	30 mm	310 mm	
	39	4,78 mm	13,96 mm	18,0 mm	31 mm	330 mm	
	41	5,04 mm	14,68 mm	18,0 mm	31 mm	340 mm	
116200 (Set)	Für rechtsseitige bronchiale Intubation						1
	26	3,40 mm	9,30 mm	15,0 mm	22 mm	280 mm	
	28	3,71 mm	10,02 mm	15,0 mm	22 mm	280 mm	
	35	4,26 mm	12,52 mm	16,5 mm	30 mm	310 mm	
	37	4,52 mm	13,24 mm	16,5 mm	30 mm	320 mm	
	39	4,78 mm	13,96 mm	18,0 mm	31 mm	340 mm	
	41	5,04 mm	14,68 mm	18,0 mm	31 mm	350 mm	
Set-Bestandteile • Doppellumiger Bronchialtubus, links • 2 Absaugkatheter • 2 Winkelkonnektoren • Y-Konnektor							
Set-Bestandteile • Doppellumiger Bronchialtubus, rechts • 2 Absaugkatheter • 2 Winkelkonnektoren • Y-Konnektor							

* Schaftlänge

Im Set enthaltenes Zubehör

Absaugkatheter

- Aus Kunststoff
- Transparent
- Mit Saugkontrolle

Winkelkonnektoren

- Mit drehbaren Konnektoren
- Doppelte Verschlusskappe
- Standardkonnektoren

Y-Konnektor

- Aus Kunststoff
- 2 × ID 15,0 mm
- 1 × AD 15,0 mm

Bei der Bestellung bitte immer Art.-Nr. und Bestellgröße angeben

Sher-I-Bronch Endobronchialtubus

Linksseitiger doppellumiger Endobronchialtubus

Für die Intubation des linken Hauptbronchus.

Die Farbkodierung unterscheidet das bronchiale vom trachealen Lumen; röntgendichte Cuff-Ansätze und Tubusspitze, durchgehende Tiefenmarkierungen, blaue Röntgenlinie für leichtere Sichtbarkeit während des Einführens der Fiberoptik, reißfester trachealer Cuff.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch


Rechtsseitiger doppellumiger Endobronchialtubus

Für die Intubation des rechten Hauptbronchus

1 großes Auge (zur Ventilation des rechten Oberlappenbronchus)


Das einzigartige Doppelcuff-Design erleichtert die Positionierung des Tubus im rechten Hauptbronchus; durchgehende Tiefenmarkierungen, blaue Röntgenlinie für leichtere Sichtbarkeit während des Einführens der Fiberoptik, reißfester trachealer Cuff.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

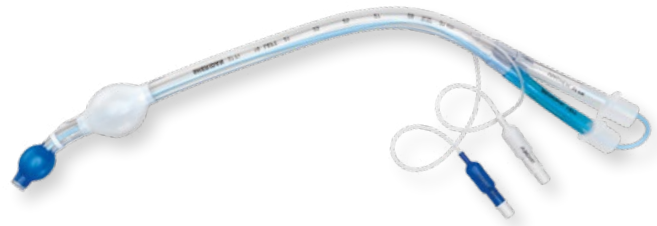

Sheridan Sher-I-Bronch Endobronchialtubus links

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	2 × ID	VE
5-16028	28	3,78 mm	1
5-16035	35	4,90 mm	
5-16037	37	5,16 mm	
5-16039	39	5,51 mm	
5-16041	41	5,56 mm	

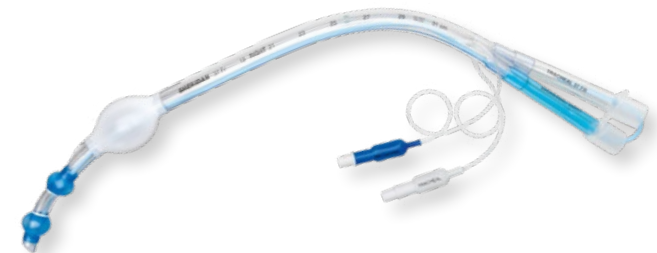

Sheridan Sher-I-Bronch Endobronchialtubus rechts

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	2 × ID	VE
5-16128	28	3,78 mm	1
5-16135	35	4,90 mm	
5-16137	37	5,16 mm	
5-16139	39	5,51 mm	
5-16141	41	5,56 mm	

Im Set enthaltenes Zubehör



Absaugkatheter

- Aus Kunststoff
- Transparent
- Mit Saugkontrolle




Winkelkonnektoren

- Mit drehbaren Konnektoren
- Doppelte Verschlusskappe
- Standardkonnektoren



Y-Konnektor

- Aus Kunststoff
- 2 × ID 15,0 mm
- 1 × AD 15,0 mm

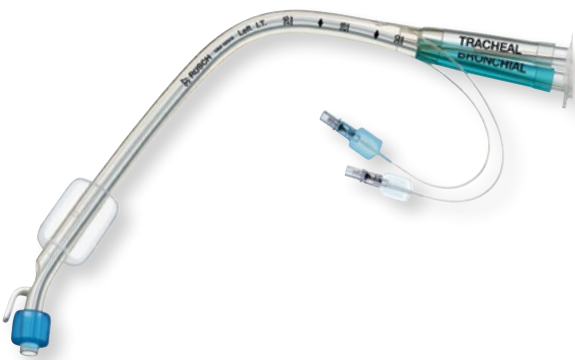


**Transparenter doppelumiger
Bronchialtubus mit weichem
Carina-Haken**

Aus PVC


Halb aufgeschobene Konnektoren,
Ventile für Luer- und Luer-Lock-
Spritzen, durchgehende Röntgenlinie
und zusätzliche Cuff-Markierungen,
transparenter trachealer Niederdruck-
Cuff mit transparentem Kontrollballon,
blauer bronchialer Niederdruck-Cuff
mit blauem Kontrollballon, Mandrin zur
Formgebung mit Fixierung, graduiert

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

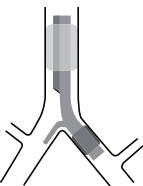


Rüsch Bronchopart Carlens Tubusset links

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	2 × ID	MAX. AD	CUFF-Ø BRONCHIAL	CUFF-Ø TRACHEAL	LÄNGE*	VE
116101 (Set)	Für linksseitige bronchiale Intubation mit Carina-Haken						1
	35	4,26 mm	12,52 mm	16,5 mm	30 mm	300 mm	
	37	4,52 mm	13,24 mm	16,5 mm	30 mm	310 mm	
	39	4,78 mm	13,96 mm	18,0 mm	31 mm	330 mm	
	41	5,04 mm	14,68 mm	18,0 mm	31 mm	340 mm	
Set-Bestandteile • Carlens doppelumiger Bronchialtubus, links • 2 Absaugkatheter • 2 Winkelkonnektoren • Y-Konnektor							

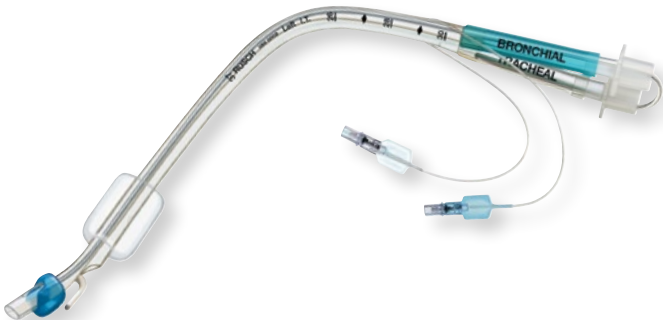

Rüsch Bronchopart White Tubusset rechts

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	2 × ID	MAX. AD	CUFF-Ø BRONCHIAL	CUFF-Ø TRACHEAL	LÄNGE*	VE
116201 (Set)	Für rechtsseitige bronchiale Intubation mit Carina-Haken						1
	35	4,26 mm	12,52 mm	16,5 mm	30 mm	300 mm	
	37	4,52 mm	13,24 mm	16,5 mm	30 mm	310 mm	
	39	4,78 mm	13,96 mm	18,0 mm	31 mm	340 mm	
	41	5,04 mm	14,68 mm	18,0 mm	31 mm	350 mm	
Set-Bestandteile • Doppelumiger Bronchialtubus, rechts • 2 Absaugkatheter • 2 Winkelkonnektoren • Y-Konnektor							

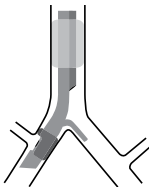


Tracheopart Tubusset

Transparenter doppelummiger Tracheostomietubus



Aus PVC

Halb aufgeschobene Konnektoren,
Ventile für Luer- und Luer-Lock-
Spritzen, durchgehende Röntgenlinie
und zusätzliche Cuff-Markierungen,
farbloser trachealer Niederdruck-Cuff
mit transparentem Kontrollballon,
blauer bronchialer Niederdruck-Cuff
mit blauem Kontrollballon, Halteplatte.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

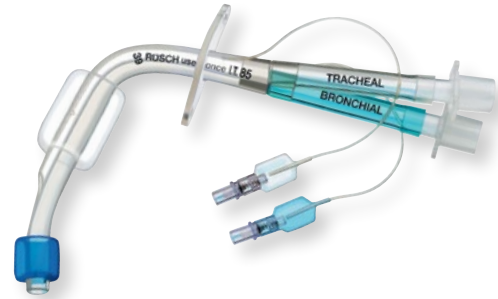

Rüsch Tracheopart Tubusset

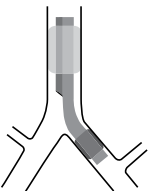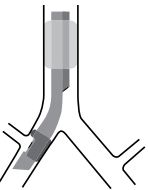ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	2 x ID	AD	CUFF-Ø BRONCHIAL	CUFF-Ø TRACHEAL	LÄNGE*	INTRA. LÄNGE**	VE
116400 (Set) 	Für linksseitige bronchiale Intubation							1
	7,5	4,78 mm	13,9 mm	18 mm	26 mm	180 mm	75 mm	
	8,5	4,78 mm	13,9 mm	18 mm	31 mm	190 mm	85 mm	
	9,5	4,78 mm	13,9 mm	18 mm	31 mm	200 mm	95 mm	
	Set-Bestandteile • Doppellumiger Tracheostomietubus aus PVC, links • Halteband • 2 Absaugkatheter • 2 Winkelkonnektoren • Y-Konnektor							
116401 (Set) 	Für rechtsseitige bronchiale Intubation							1
	7,5	4,78 mm	13,9 mm	18 mm	26 mm	190 mm	75 mm	
	8,5	4,78 mm	13,9 mm	18 mm	31 mm	200 mm	85 mm	
	9,5	4,78 mm	13,9 mm	18 mm	31 mm	210 mm	95 mm	
	Set-Bestandteile • Doppellumiger Tracheostomietubus aus PVC, rechts • Halteband • 2 Absaugkatheter • 2 Winkelkonnektoren • Y-Konnektor							

* Schaftlänge ** Intratracheale Schenkellänge

Im Set enthaltenes Zubehör



Absaugkatheter

- Aus Kunststoff
- Transparent
- Mit Saugkontrolle



Winkelkonnektoren

- Mit drehbaren Konnektoren
- Doppelte Verschlusskappe
- Standardkonnektoren



Y-Konnektor

- Aus Kunststoff
- 2 × ID 15,0 mm
- 1 × AD 15,0 mm



Halteband

- Einstellbar

Bei der Bestellung bitte immer Art.-Nr. und Bestellgröße angeben

Zerstäubung

Für eine effektive, verlässliche und einfache Medikamentenabgabe

Dank ihrer innovativen Technologie bietet die Produktpalette der Zerstäuber eine einfache und effektive Lösung für die Medikamentenabgabe. Die einzigartige Spitze der Medikamentenzerstäuber zerstäubt Medikamente in einen feinen Nebel mit einer Partikelgröße mit von 30–100 Mikron. Anschließend werden die Partikel durch das Schleimhautgewebe in den Blutkreislauf aufgenommen.



MAD Nasal

Intranasaler mukosaler Medikamentenzerstäuber

Der MAD Nasal Zerstäuber ermöglicht die nadellose Medikamentenabgabe über die Nasenschleimhaut.

Der MAD Nasal bildet eine Abdichtung mit dem Nasenloch und gibt sehr feine Medikamentenpartikel an die Nasenschleimhaut ab. Anschließend werden die Partikel über die Nasenschleimhaut in den Blutkreislauf aufgenommen, wodurch ein First-Pass-Metabolismus umgangen wird.¹



MAD Nasal intranasaler mukosaler Medikamentenzerstäuber		
ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	VE/KARTON
MAD100	MAD Nasal Zerstäuber mit 3-ml-Spritze	25
MAD110	MAD Nasal Zerstäuber mit 1-ml-Spritze	25
MAD130	MAD Nasal Zerstäuber mit 1-ml-Spritze und Entnahmespike	25
MAD140	MAD Nasal Zerstäuber mit 3-ml-Spritze und Entnahmespike	25
MAD300	MAD Nasal Zerstäuber ohne Spritze	25

Produktspezifikationen				
ART.-NR.	TYPISCHE PARTIKELGRÖSSE	SPITZENDURCHMESSER	LÄNGE	TOTRAUM
MAD100	30–100 µm	4,3 mm	4,3 cm	0,15 ml
MAD140	30–100 µm	4,3 mm	4,3 cm	0,15 ml
MAD300	30–100 µm	4,3 mm	4,3 cm	0,06 ml
MAD600	30–100 µm	4,8 mm	22,6 cm	0,25 ml
MAD700	30–100 µm	4,8 mm	22,6 cm	0,19 ml
MAD720	30–100 µm	4,8 mm	12,4 cm	0,13 ml

MADgic Laryngotrachealer mukosaler Medikamentenzerstäuber



Der MADgic ist ein Medikamentenzerstäuber für den Einmalgebrauch. Sein einzigartiges Design besteht aus einer flexiblen und gleichzeitig formstabilen Kanüle und einer Spitze, die Medikamente in einen feinen Nebel mit einer Partikelgröße von 30–100 Mikron zerstäubt. Der MADgic-Zerstäuber ist ein Produkt zur direkten Abgabe von zerstäubten Lokalanästhetika an die Schleimhäute der Atemwege. Hierdurch wird ein sanftes Aufwachen aus der Narkose ohne Husten ermöglicht.²

- Einmalgebrauch

LMA® MADgic Medikamentenzerstäuber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
MAD720	Zerstäuber (Mucosal Atomization Device, MAD) zur Medikamentenabgabe für Kinder	25
MAD700	Mukosaler Medikamentenzerstäuber ohne Spritze	25
MAD600	Mukosaler Medikamentenzerstäuber mit 3-ml-Spritze	25

1. Corrigan M, Wilson S, Hampton J. Safety and efficacy of intranasally administered medications in the emergency department and prehospital settings. *Am J HealthSyst Pharm.* 2015; 72: 15441554.
2. Diachum CAB, Tunink BP, Brock-Utne JG. Suppression of cough during emergence from general anaesthesia: laryngotracheal lidocaine through a modified endotracheal tube. *J Clin Anesth.* 2001;13(6):447–451.

Oropharyngeal- und Nasopharyngealtuben

Für ein schnelles und sicheres Freihalten der Atemwege ohne Intubation

Die große Auswahl bei Teleflex an Oropharyngeal- und Nasopharyngealtuben der Marke Rüsch bietet Ärzten eine vollständige Bandbreite an Atemwegsmöglichkeiten zur sicheren und adäquaten Lösung für die meisten Indikationen.

Alle Versionen – nicht nur die Standardmodelle aus verschiedenen Materialien sondern auch die Spezialmodelle für die Endoskopie bei gleichzeitiger Fixierung des Trachealtubus – wurden speziell entwickelt, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden zu können.

Oropharyngealtuben



Aus weichem PVC.

- Guedeltubus
- Farbkodiert
- Klar
- Latexfrei
- DEHP-frei
- Einmalgebrauch

Rüsch Oropharyngealtuben, PVC

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	ISO-GRÖSSE	FARBKODIERUNG	VE
124700 unsteril einzeln verpackt	000	3	lila	10
	00	4	rosa	
	0	5	blau	
	1	6	schwarz	
	2	7	weiß	
	3	8	grün	
	4	9	gelb	
	5	10	rot	
	6	12	violett	

Oropharyngealtuben



Aus Polyethylen.

- Guedeltubus
- Farbkodiert
- Latexfrei
- DEHP-frei
- Einmalgebrauch

Rüsch Oropharyngealtuben, Polyethylen

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	ISO-GRÖSSE	FARBKODIERUNG	VE
124900 steril	000	3	lila	10
	00	4	rosa	
	0	5	blau	
	1	6	schwarz	
	2	7	weiß	
	3	8	grün	
	4	9	gelb	
	5	10	rot	
672901 unsteril lose verpackt	00	4	rosa	50
	0	5	blau	
	1	6	schwarz	
	2	7	weiß	
	3	8	grün	
	4	9	gelb	
	5	10	rot	

Oropharyngealtubus für die fiberoptische Intubation



- Im Design eines Guedeltubus
- Aus weichem PVC
- Klar
- Entlang der Oberseite geschlitzt
- Latexfrei
- DEHP-frei
- Einmalgebrauch



Oropharyngealtuben für die fiberoptische Intubation

ART.-NR.	ISO-GRÖSSE	FARBKODIERUNG	VE
124450 unsteril einzeln verpackt	8	Grün	10
	9	Gelb	
	10	Rot	

Nasopharyngealtuben



Nasopharyngealtubus, nach Wendl

Aus Wirupren.

- Mit verstellbarer Scheibe und erweitertem Ende
- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch

Rüsch Nasopharyngealtuben aus Wirupren nach Wendl

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	ID	AD	LÄNGE	VE
185420	12	2,0 mm	4,0 mm	95 mm	5
	14	2,5 mm	4,7 mm	95 mm	
	16	3,4 mm	5,3 mm	95 mm	
	18	3,5 mm	6,0 mm	95 mm	
	20	4,5 mm	6,7 mm	125 mm	
	22	5,0 mm	7,3 mm	170 mm	
	24	5,5 mm	8,0 mm	170 mm	
	26	6,0 mm	8,7 mm	170 mm	
	28	6,5 mm	9,3 mm	170 mm	
	30	7,0 mm	10,0 mm	170 mm	
	32	8,7 mm	10,7 mm	170 mm	
	34	9,0 mm	11,3 mm	170 mm	
	36	9,4 mm	12,0 mm	170 mm	



Nasopharyngealtubus

Aus PVC

- Transparent
- Steril
- Latexfrei
- DEHP-frei
- Einmalgebrauch

Rüsch Nasopharyngealtuben aus PVC

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	ID	AD	LÄNGE	VE
125410	12	2,5 mm	4,0 mm	60 mm	10
	14	3,0 mm	4,7 mm	72 mm	
	16	3,5 mm	5,3 mm	85 mm	
	18	4,0 mm	6,0 mm	105 mm	
	19	4,5 mm	6,3 mm	110 mm	
	20	5,0 mm	6,7 mm	115 mm	
	22	5,5 mm	7,3 mm	125 mm	
	24	6,0 mm	8,0 mm	130 mm	
	26	6,5 mm	8,7 mm	140 mm	
	28	7,0 mm	9,3 mm	155 mm	
	30	7,5 mm	10,0 mm	165 mm	
	32	8,0 mm	10,7 mm	170 mm	
	34	8,5 mm	11,3 mm	175 mm	
	36	9,0 mm	12,0 mm	180 mm	

Nasopharyngealtuben

Nasopharyngealtubus Rüschi Gold

Aus Naturlatex.

- Mit verstellbarer Scheibe und erweitertem Ende
- Steril
- Einmalgebrauch



Rüschi Nasopharyngealtuben Rüschi Gold

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	ID	AD	LÄNGE	VE
185200*	20	4,5 mm	6,7 mm	125 mm	10
	22	5,0 mm	7,3 mm	170 mm	
	24	5,5 mm	8,0 mm	170 mm	
	26	6,0 mm	8,7 mm	170 mm	
	28	6,5 mm	9,3 mm	170 mm	
	30	7,0 mm	10,0 mm	170 mm	
	32	7,5 mm	10,7 mm	170 mm	
	34	8,0 mm	11,3 mm	170 mm	
	36	8,5 mm	12,0 mm	170 mm	

*Achtung

Diese Produkte enthalten Latex, das allergische Reaktionen auslösen kann.

Nasopharyngealtubus, nach Robertazzi

Aus Wirupren.

- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch



Rüschi Nasopharyngealtubus nach Robertazzi

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	ID	AD	LÄNGE	VE
185410	20	4,5 mm	6,7 mm	100 mm	10
	22	5,0 mm	7,3 mm	105 mm	
	24	5,5 mm	8,0 mm	105 mm	
	26	6,0 mm	8,7 mm	110 mm	
	28	6,5 mm	9,3 mm	117 mm	
	30	7,0 mm	10,0 mm	118 mm	
	32	8,7 mm	10,7 mm	140 mm	
	34	9,0 mm	11,3 mm	155 mm	
	36	9,4 mm	12,0 mm	170 mm	

Anästhesiemasken / Atembeutel

Hoher Tragekomfort, hervorragende Passform, zuverlässige Leistung

Die breite Auswahl unserer Anästhesiemasken und Atembeutel aus PVC, Silikon oder Wirupren von Rüsch und Hudson RCI wird allen Anforderungen gerecht.

Diese Lösungen ermöglichen eine verlässliche und sichere Anwendung in anerkannter Qualität sowie außerordentlichen Tragekomfort, und sie sind klassische Beispiele für unsere langjährige Tradition als Anbieter bewährter, qualitativ hochwertiger Produkte auf dem Markt für Medizinprodukte.

Einweg-Atemmasken



Sure Seal Anästhesiemasken

- Einmalgebrauch
- Latexfrei
- DEHP-frei

Hudson RCI Sure Seal Anästhesiemasken

ART.-NR.	GRÖSSE	BESTELLGRÖSSE	BEFÜLLUNGSVENTIL	KONNEKTOR	RINGFARBE	VE
41271	Neugeborenes	0		15 mm	weiß	20
41272	Kleinkind	1		15 mm	rosa	
41273	Kind	2		22 mm	gelb	
41274	Small	3		22 mm	grün	
41275	Medium	4		22 mm	rot	
41276	Large	5		22 mm	blau	
41277	Neugeborenes	0	●	15 mm	weiß	
41278	Kleinkind	1	●	15 mm	rosa	
41279	Kind	2	●	22 mm	gelb	
41280	Small	3	●	22 mm	grün	
41281	Medium	4	●	22 mm	rot	
41282	Large	5	●	22 mm	blau	



Clear Comfort Maske

- Größen 0 bis 2: duftend
- Einmalgebrauch
- Latexfrei
- DEHP-frei



Rüsch Clear Comfort Maske mit Befüllungsventil

ART.-NR.	GRÖSSE	BESTELLGRÖSSE	BEFÜLLUNGSVENTIL	KONNEKTOR	RINGFARBE	DUFT	VE
415800	Neugeborenes	0	●	15 mm	weiß	Kirschduft	20
415802	Kleinkind	1	●	15 mm	rosa	Kirschduft	
415804	Kind	2	●	22 mm	gelb	Kirschduft	
415806	Small	3	●	22 mm	grün	Kein Duft	
415808	Medium	4	●	22 mm	rot	Kein Duft	
415810	Large	5	●	22 mm	blau	Kein Duft	

Wiederverwendbare Anästhesiemasken

Silikon-Anästhesiemasken

- Transparent
- Nicht aufblasbar
- Latexfrei

Größe 3–5



Größe 0–2



Rüsch Silikon-Anästhesiemasken

ART.-NR.	GRÖSSE	BESTELL-GRÖSSE	FORM	KONNEKTOR	VE
154900	Kleinkind, klein	0	Rund	15 mm	2
	Kleinkind, groß	1	Rund	15 mm	
	Kind, klein	2	Rund	22 mm	
	Kind, groß	3	Anatomisch	22 mm	
	Erwachsener, klein	4	Anatomisch	22 mm	
	Erwachsener, groß	5	Anatomisch	22 mm	

Kinderanästhesiemaske aus Silikon

- Nach Rendall-Baker-Soucek
- Transparent
- 22-mm-Anschluss
- Latexfrei



Rüsch Kinderanästhesiemaske aus Silikon

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE	VE
154300	1	2
	2	
	3	

Atembeutel

Neopren-Atembeutel

- Grün
- 22-mm-Anschluss
- Latexfrei
- Einmalgebrauch



Rüsch Neopren-Atembeutel

ART.-NR. UNSTERIL	BEUTELVOLUMEN	BESCHREIBUNG	VE
191670-000005	0,5l		10
191670-000010	1,0l		
191670-000020	2,0l		
191670-000030	3,0l		
191670-000025	2,0l	Mit Aufhänger	10



SilkoBag

- Aus Silikon
- 22-mm-Anschluss
- Latexfrei
- Steril

Rüsch SilkoBag

ART.-NR.	BESTELLGRÖSSE/VOLUMEN	BESCHREIBUNG	VE
150700-000005	0,5l	Mit Aufhänger	2
150700-000010	1,0l		
150700-000015	1,5l		
150700-000020	2,0l		
150700-000023	2,3l		
150700-000030	3,0l		

Beatmungsbeutel

Lifesaver Einweg-Beatmungsbeutel

Die Hudson RCI Lifesaver Einweg-Beatmungsbeutel vereinen Qualität, Funktionen und Leistungsfähigkeit mit den Vorteilen eines Einwegprodukts. Der rechtwinklig angeordnete Sauerstoffanschluss lässt sich um 360° drehen. Die Beutel für Kinder und Neugeborene besitzen ein eingebautes Überdruckventil und einen Anschluss zur Drucküberwachung.

- Mit Maske und Flussumlenkung
- Einzeln verpackt
- Einmalgebrauch



Hudson Beatmungsbeutel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BEUTELVOLUMEN	VE
45372	Erwachsener	1800 ml	6
45367	Pädiatrisch (Kind)	500 ml	
45362	Neonatal (Kleinkind)	300 ml	



Hudson Peep-Ventil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
45385	• Einstellbar von 5 bis 20 cm H₂O • ISO-Standardkonnektor, 30 mm ID • Einzeln verpackt	10

Zubehör



Silkospray Universal-Silikonspray		
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
556000	• Universal-Silikonspray • Verhindert das Inkrustieren von Gummi-, Latex- und PVC-Instrumenten sowie das Verkleben mit der Schleimhaut. • CFC-frei • Latexfrei	10

Hinweis:
*Das Silkospray Silikonspray ist für Geräte aus Silikon nicht geeignet.
Für Silikonprodukte empfehlen wir unser wasserlösliches TrachJell Gleitgel.*

Einzeldosis wasserlösliches Gleitgel

Für eine erfolgreiche Intubation muss eine Laryngealmaske gleitfähig gemacht werden. Teleflex bietet nun ein schnell und einfach zu verwendendes steriles, wasserlösliches Gleitgel als Einzeldosis.




TrachJell Gleitgel		
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
556100	• 8,5 g • steril	25



Schleimsauger

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
TM-231000	• AD 4,0 mm / Volumen: 40 ml	25

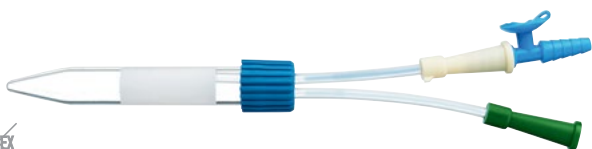

Trachealsauger

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
TM-231100	• Mit Saugregulierungsventil • Etikett • Zusätzliche Verschlusskappe	25



Saugregulierungsventil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
TM-231200	• Mit Verschlussstopfen	25



Ulmer-Fixator

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
503500	Ulmer-Fixator, mit Klemmstück für Normschiene für OP-Tisch 10 x 25 mm, Fixiervorrichtung aus Kunststoff und verchromtem Metall, mit Kunststoff-Sternscheibe zur Fixierung von Atemschläuchen, Kathetern und Schläuchen.	1
503503	Klemmstück für Normschiene für OP-Tisch 10 x 25 mm	1



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
503502*	Ulmer-Fixator, mit Universalklemmstück für Normschiene für OP-Tisch 10 x 25 mm, Fixiervorrichtung aus Kunststoff und verchromtem Metall, mit Kunststoff-Sternscheibe zur Fixierung von Atemschläuchen, Kathetern und Schläuchen.	1
503501*	Universalklemme, passend für Schienen mit einem Durchmesser von ca. 20 bis 40 mm und für ebene Flächen in den Größen von ca. 20 x 10 mm bis ca. 45 x 10 mm und von ca. 5,5 x 35 mm bis ca. 30 x 35 mm.	1

*Achtung

Diese Produkte enthalten trockenen Naturkautschuk, der allergische Reaktionen auslösen kann.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
503600	Nur Scheibe	1

Konnektoren

Produkte für die einfache und sichere Intubation



Konnektor			
	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
	191526	Doppelter Swivel- Konnektor mit Absaugport 22M/15F • Steril • Einmalgebrauch	50



Mainzer Universaladapter			
	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
	514805	Größen: AD 15,0 mm und 22,0 mm / ID 15 mm • Aus Kunststoff, blau • Zur Erleichterung der Einführung von fiberoptischen Geräten oder Absaugkathetern in den Beatmungskreislauf bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Beatmung • Konnektor für Gesichtsmasken, Trachealtuben und Laryngeal-masken • Lateraler Konnektor für Narkose-system • Doppelte Verschlusskappe aus Silikon • Latexfrei • Steril	5



Doppelte Verschlusskappe			
	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
	514801	Größen: ID 3,5 mm, transparent • Für Mainzer Universaladapter (Art.-Nr. 514805) • Aus Silikon • Latexfrei • Steril	5

Laryngoskope

Unabhängig davon, ob Ihre Einrichtung Einweg- oder wiederverwendbare Spatel und Griffe benötigt und ob Sie mit Fiberoptik- oder Standard-Systemen arbeiten, wir bieten ein qualitativ hochwertiges und einzigartiges Sortiment, das all Ihre Anforderungen an die Intubation erfüllt.

Rüsch Polaris Laryngoskopspatel

Die Haltbarkeit eines wiederverwendbaren Spatels, kombiniert mit dem Komfort eines Einwegspatels.

Der Rüsch Polaris Laryngoskopspatel fühlt sich dank seiner langlebigen Metallkonstruktion an wie ein wiederverwendbarer Spatel, und bietet gleichzeitig den Komfort eines Einwegspatels.

Der Rüsch Polaris Laryngoskopspatel ist unsere neueste Innovation unter den Einweg-Laryngoskopspateln.

Er steht für das umfangreiche Sortiment an Laryngoskopzubehör von Rüsch.

Ein Katalog mit dem gesamten Sortiment ist auf Anfrage erhältlich.
Art.-Nr. MCI-2018-0583.



Rüsch Polaris Einweg-Laryngoskopspatel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE (MM)	DISTALE BREITE (MM)	FARBCODIERUNG		VE
Macintosh-Spatel						
4150100	Mac 0	85,0	10,7		Pfirsich	10
4150110	Mac 1	94,5	9,9		Weiß	
4150120	Mac 2	111,0	13,0		Blau	
4150130	Mac 3	133,0	14,0		Gelb	
4150140	Mac 4	149,00	13,0		Rosa	
4150150	Mac 5	159,00	14,5		Dunkelgelb	
Miller-Spatel						
4150003	Miller 000	60,0	7,0		Hellgrün	10
4150002	Miller 00	66,5	12,8		Beige	
4150001	Miller 0	78,0	12,8		Violett	
4150010	Miller 1	103,0	12,8		Orange	
4150020	Miller 2	154,0	13,5		Grau	
4150030	Miller 3	195,0	13,5		Grün	
4150040	Miller 4	205,0	19,0		Lavendel	

Tracheostomie

TracFlex Plus Tracheostomiekannüle zur subglottischen Absaugung

Die TracFlex Plus zur subglottischen Absaugung ist ein Beispiel für das umfassende Angebot an Tracheostomieprodukten und Serviceleistungen von Rüsch. Unser hochwertiges und einzigartiges Sortiment umfasst außerdem flexible/verstärkte Tracheostomiekannülen in weiteren Ausführungen (mit und ohne Cuff, gefenstert, gebogene extralange Tuben, Zubehör) sowie semi rigide Rüsch Tracheofix Tracheostomiekannülen für die Verwendung bei einem Patienten. Des Weiteren Zubehör für geringe Atemarbeit sowie unsere Crystal Clear-Produkte aus PVC für den Einmalgebrauch, die eine Alternative zu TracFlex Plus für das subglottische Absaugen bei einer Tracheostomie umfassen (mit und ohne unserem farbkodierten, flexiblen Innenkanülensystem).

Ein Katalog mit dem gesamten Sortiment ist auf Anfrage erhältlich.
Art.-Nr. MCI-2018-0544.




Rüsch TracFlex Plus Set zur subglottischen Absaugung

ART.-NR.	BESTELL-GRÖSSE / ID	AD IN MM	CLL* IN MM	ABM. A IN MM	ABM. B IN MM	ABM. C IN MM	WINKELØ (CA.)	CUFF-Ø IN MM **	VE
121905	● 7,0	11,1	67,8	37,0	8,0	22,8	100	23	2
	● 8,0	12,6	85,8	40,0	20,5	25,4	100	27	2
	● 9,0	13,8	116,8	44,0	46,4	26,4	100	30	2
	● 10,0	15,4	119,8	44,0	41,8	34,0	100	32	2
	● 11,0	16,7	127,8	47,0	47,7	33,1	100	35	2


* Gesamtlänge (CLL = A + B + C)

** Nur Versionen mit Cuff

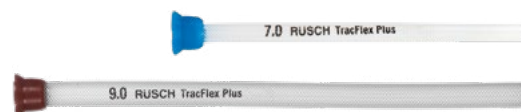


Rüsch TracFlex Plus Innenkanülen

BESTELLGRÖSSE DER KANÜLE / ID	ID DER INNENKANÜLE	AD DER INNENKANÜLE	VE
● 7,0	5,5	6,2	10
● 8,0	6,5	7,2	10
● 9,0	7,8	8,3	10
● 10,0	8,8	9,4	10
● 11,0	9,8	10,4	10

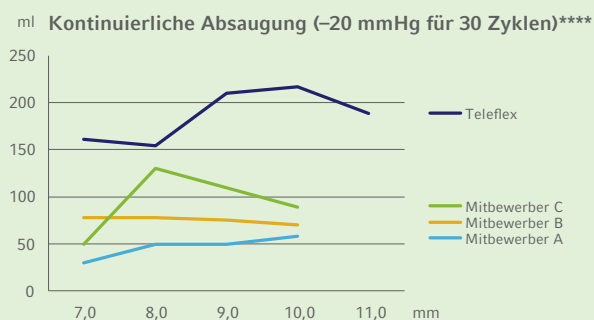

Abgesaugte Testsekrete in ml nach 30 Sekunden kontinuierlicher Absaugung mit -20 mmHg

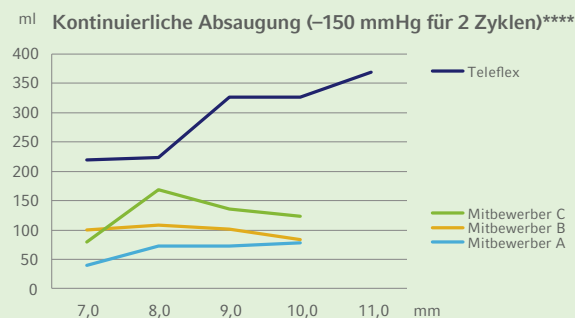

Abgesaugte Testsekrete in ml nach 2 Zyklen mit 10 Sekunden kontinuierlicher Absaugung und 5 Sek. Unterbrechung -150 mmHg

**** Titel der Entwicklungsstudie: Tracheostomy Tube with Subglottic Suction Line Performance. Referenznr.: ES-17-035. 15. Juli 2017. Testdaten liegen vor.

Beatmungsschläuche, Tubusverlängerungen Und HME/F

Double D

Der Double D Beatmungsschlauch ist ein Beispiel für das vielfältige Angebot an Narkoseschläuchen für die Anästhesie und die Intensivstation, die wir Ihnen unter der Marke Rüsch anbieten können. Dieses hochwertige, vielfältige Sortiment wird durch Standard-Beatmungsschläuche in glatter, gewellter und ausziehbarer Ausführung sowie durch Rüsch Tubusverlängerungen und Gibeck HME/F sowie die Kombination aus beiden ergänzt.

Ein Katalog mit dem gesamten Sortiment ist auf Anfrage erhältlich:
Art.-Nr. MCI 2018 0336



Integriertes Narkose- und Schlauchsystem mit Winkelstück und CO₂-Anschluss für Kapnometrie

Rüsch Double D

	ART.-NR. UNSTERIL	TYP	LÄNGE	ZUSATZSCHLAUCH	BEATMUNGSBEUTEL	VE
	198886-001800	gewellt	180 cm	120 cm	2 l	20
	198886-001801	gewellt	180 cm	150 cm	2 l	20
	198886-031800	gewellt	180 cm	300 cm	2 l	20
	198886-032800	gewellt	280 cm	300 cm	2 l	20

Double D SET für alle Patientengruppen (≥5 ml Vt), Winkelstück und CO₂-Anschluss, weiche Konnektoren, mit und ohne Zusatzschlauch und Beutel

Kombinationen Tubusverlängerung und Filter: Humid-Vent-Filter Compact

	ART.-NR.	GERÄTESEITIGER ANSCHLUSS	STERIL / UNSTERIL	LÄNGE	VE
		22F/15M	steril	5 cm	25
	191658-000100	22F/15M	steril	10 cm	25
	191658-000150	22F/15M	steril	15 cm	25
		22F/15M	steril	20 cm	25
		22F/15M	steril	25 cm	25
		22F/15M	unsteril	10 cm	25
	191657-000150	22F/15M	unsteril	15 cm	25

Glatte Tubusverlängerung mit Doppeldrehkonnektor, Dichtung um Absaugport und Humid-Vent-Filter Compact

Index

ART.-NR.	SEITE
1B2020	8
1B2025	8
1B2030	8
1B2040	8
1B2050	8
1E5030	11
1E5040	11
1E5050	11
100010	9
100015	9
100020	9
100025	9
100030	9
100040	9
100050	9
100060	9
100180	28
100181	27
100380	21
100382	21
102004	30
103600	25
104000	24
104100	24
104103	24
104201	22
104202	22
104203	22
104204	22
110020	9
110025	9
110030	9
110040	9
110050	9
110060	9
111780	28
111781	26
111782	26
112082	20
112460	29
112480	18
112481	18
112482	18
112680	20
112682	20
112682	20

ART.-NR.	SEITE
112700	15
115020	8
115025	8
115030	8
115040	8
115050	8
116100	36
116101	38
116200	36
116201	38
116400	39
116401	39
121905	54
124700	42
124900	42
125010	7
125015	7
125020	7
125025	7
125030	7
125040	7
125050	7
125410	44
130030	12
130040	12
130050	12
130099	13
131060	13
131065	13
131070	13
131075	13
131080	13
135130	12
135140	12
135150	12
136060	13
136065	13
136070	13
136075	13
136080	13
142010	6
142015	6
142020	6
142025	6
142030	6
142040	6

ART.-NR.	SEITE
142050	6
150010	5
150015	5
150020	5
150025	5
150030	5
150040	5
150050	5
154300	47
154900	47
175010	4
175015	4
175020	4
175025	4
175030	4
175040	4
175050	4
185200*	45
185410	45
185420	44
191526	52
192030	3
192040	3
192050	3
195030	3
195040	3
195050	3
112091060	16
112091065	16
112091070	16
112091075	16
112091080	16
112091085	16
112091090	16
105200-000010	6
105200-000015	6
105200-000020	6
105200-000025	6
105200-000030	6
105200-000040	6
105200-000050	6
105200-000060	6
105230-000010	7
105300-000010	6
105300-000015	6
105300-000020	6

ART.-NR.	SEITE
105300-000025	6
105300-000030	6
105300-000040	6
105300-000050	6
105300-000060	6
150700-000005	48
150700-000010	48
150700-000015	48
150700-000020	48
150700-000023	48
150700-000030	48
191657-000150	55
191658-000100	55
191658-000150	55
191670-000005	48
191670-000010	48
191670-000020	48
191670-000025	48
191670-000030	48
198886-001800	55
198886-001801	55
198886-031800	55
198886-032800	55
41271	46
41272	46
41273	46
41274	46
41275	46
41276	46
41277	46
41278	46
41279	46
41280	46
41281	46
41282	46
4150001	53
4150002	53
4150010	53
4150020	53
4150030	53
4150040	53
4150110	53
4150120	53
4150130	53
4150140	53
4150150	53

ART.-NR.	SEITE
45362	49
45367	49
45372	49
45385	49
415800	46
415802	46
415804	46
415806	46
415808	46
415810	46
5-10106	19
5-10107	19
5-10108	19
5-10109	19
5-10110	19
5-10111	19
5-10112	19
5-10113	19
5-10114	19
5-10115	19
5-10116	19
5-10117	19
5-10118	19
5-10119	19
5-10120	19
5-10310	19
5-10311	19
5-10312	19
5-10313	19
5-10314	19
5-10315	19
5-10316	19
5-10317	19
5-10318	19
5-10320	19
5-10404	21
5-10405	21
5-10406	21
5-10407	21
5-10408	21
5-10409	21
5-10410	21
5-10411	21
5-10412	21
5-10413	21
5-10414	21

ART.-NR.	SEITE
5-11108	29
5-11110	29
5-11112	29
5-12510	23
5-12511	23
5-12512	23
5-12513	23
5-12514	23
5-12515	23
5-12516	23
5-12517	23
5-12518	23
5-12610	23
5-12611	23
5-12612	23
5-12613	23
5-12614	23
5-12615	23
5-12616	23
5-12617	23
5-12618	23
5-12906	25
5-12907	25
5-12908	25
5-12909	25
5-12910	25
5-15100	32
5-15101	32
5-15102	32
5-15103	32
5-15110	32
5-15120	32
5-16028	37
5-16035	37
5-16037	37
5-16039	37
5-16041	37
5-16128	37
5-16135	37
5-16137	37
5-16139	37
5-16141	37
503000	33
503100	31
503110	31
503300-000150	27

ART.-NR.	SEITE
503300-000200	27
503300-000245	27
503500	51
503501*	51
503502*	51
503503	51
503600	51
503700	32
514801	52
514805	52
556000	50
556100	50
672901	42
6730-0572-800	17
8731-1253-901	17
8732-1253-901	17
8732-2253-901	17
8733-1253-901	17
HC053	17
MAD100	40
MAD110	40
MAD130	40
MAD140	40
MAD300	40
MAD600	40
MAD600	41
MAD700	40
MAD700	41
MAD720	40
MAD720	41
MG-02770-002	35
MI361	17
TM-230100	15
TM-231000	51
TM-231100	51
TM-231200	51

Teleflex ist ein weltweiter Anbieter von medizintechnischen Produkten, die dazu beitragen, die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

Unser unermüdliches Streben, unerfüllte klinische Bedürfnisse genau zu bestimmen, setzen wir um in zweckorientierte Innovationen – zum größtmöglichen Nutzen für Patienten und die im Gesundheitswesen tätigen Personen. Mit unserem vielseitigen Portfolio bieten wir Lösungen in den Bereichen Gefäß- und interventioneller Zugang, Chirurgie, Anästhesie, Kardiologie, Urologie, Notfallmedizin und Beatmung. Teleflex-Mitarbeiter auf der ganzen Welt verbindet das gleiche Verständnis, mit ihrem Tun tagtäglich etwas bewegen zu wollen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.teleflex.com.

Zur Teleflex-Familie gehören Arrow, Deknatel, LMA, Pilling, Rüsch, UroLift und Weck – renommierte Marken, vereint durch ein gemeinsames Ziel.

Unternehmenssitz

Telefon +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Regionale Niederlassungen

USA: Telefon +1 919 544 8000, gebührenfreie Rufnummer 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Lateinamerika: Telefon +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

International: Telefon +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irland

Australien 1300 360 226

Belgien +32 (0)2 333 24 60

China (Peking) +86 (0)10 6418 5699

China (Shanghai) +86 (0)21 6060 7000

Deutschland +49 (0)7151 691 3004

Frankreich +33 (0)5 62 18 79 40

Griechenland +30 210 67 77 717

Indien +91 (0)80 4093 4790

Italien +39 0362 58911

Japan +81 (0)3 6632 3600

Kanada +1 (0)800 387 9699

Korea +82 2 536 7550

Mexiko +52 55 5002 3500

Neuseeland 0800 601 100

Niederlande +31 (0)88 00 215 00

Österreich +43 (0)1 402 47 72

Polen +48 22 4624032

Portugal +351 225 491 051

Schweiz +41 (0)31 818 40 90

Singapur (Länder in Südostasien ohne Direktvertrieb) +65 6439 3000

Slowakische Republik +421 (0)3377 254 28

Spanien +34 91 198 84 31

Südafrika +27 (0)11 807 4887

Tschechische Republik +420 (0)495 759 111

Vereinigtes Königreich +44 (0)1494 53 27 61

Weitere Informationen erhalten Sie unter teleflex.com

Hudson RCI ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP.

Teleflex, das Teleflex-Logo, Arrow, Bronchopart, Cath-Guide, Cuff Pilot, Deknatel, EndoGuide, EndoTest, EZ-Blocker, EZ-Multiport, Gibeck, HVT, LMA, LMA Classic, LMA Fastrach, LMA Flexible, LMA ProSeal, LMA Protector, LMA Supreme, LMA Unique, MADgic, MAD Nasal, Push-To-Set, Pilling, Rüsch, SafetyClear, Second Seal, Sher-I-Bronch, Sheridan, Silkospray, Super SafetyClear, TracFlex, Tracheopart, TrachJell, UroLift, Weck und Wirupren sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern registriert sind.

Die im vorliegenden Dokument genannten Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanweisungen der Produkte. Es sind unter Umständen nicht alle Produkte in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter. Überarbeitet: 01/2022.

© 2022 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

MCI-2018-0365-DE · REV 4 · 03 22 PDF