

AmbuMan® Wireless AmbuMan® Instrument



Arme- und Beineset optional erhältlich

Die wichtigsten Vorteile

- Optimales BLS-Algorithmus-Trainingsgerät
- Robustes Design
- Realistisches Training der Thoraxkompression
- Brustkorbsteifigkeit variabel einstellbar
- Ambu Hygienesystem für Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase-Beatmung
- Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Erweiterte Feedbackanzeige (Beatmungsvolumen, Kompressionstiefe, Handposition, Magenblähungen)
- Carotispuls ist während der Herzdruckmassage fühlbar und kann durch den manuellen Pulsbalg zusätzlich simuliert werden

AmbuMan Wireless

- Ambu Wireless Technologie
- Browserbasiertes Ambu Manikin Management Module zur Steuerung, Dokumentation und Monitoring
- Lizenzfreies Selftraining-Modul



AmbuMan®

Der AmbuMan ist das optimale Trainingsgerät für das erweiterte BLS-Algorithmus-Training. Er ist speziell für die Basisausbildung von ärztlichem und pflegerischem Personal sowie für die Ausbildung von Laien konzipiert. Dank seines geschlossenen Torsos kann die Nutzung eines Trainings-AEDs und die Platzierung von Defibrillations-elektroden optimal trainiert werden

Der AmbuMan ermöglicht das optimale Training der Thoraxkompression in Kombination mit einer realistischen Beatmung. Das anwenderfreundliche, patentierte Ambu Hygienesystem verhindert Kreuzinfektionen und sorgt für realistische Atemwegswiderstände und eine Expiration durch Mund und Nase.

Anzeigeeinstrument

Das Anzeigeeinstrument zeigt dem Trainer das Volumen der zugeführten Luft (in L) und die Thoraxkompressionstiefe (in mm) an. Des Weiteren visualisiert es die Kompression mit falschem Druckpunkt, sowie eine Magenblähung durch ein deutliches Warnsymbol.

Ambu Manikin Management Module

Das Herzstück bildet der AmbuMan mit neuester, integrierter Ambu Wireless Technologie. Über das browserbasierte Ambu Manikin Management Module erfolgt die kabellose Steuerung, Dokumentation und Monitoring des Trainingsgerätes. Das Ambu Manikin Management Module bildet die zentrale Schnittstelle, bei der alle Daten und Informationen zusammenlaufen: Kompressionstiefe, richtige Handposition, Beatmungsvolumen, Mageninsufflation.

Selftraining-Modul

Der AmbuMan Wireless beinhaltet standardmäßig ein lizenzfreies Selftraining-Modul, das es ermöglicht Trainingsstationen zu etablieren und ein trainerungebundenes Training jederzeit durchzuführen. Somit können Reanimationsteams kontinuierlich trainieren oder Auszubildende sich auf die Prüfung vorbereiten.

Carotispuls

Der Carotispuls ist während der Herzdruckmassage fühlbar und kann durch einen manuellen Pulsbalg simuliert werden.

Spezifikationen

AmbuMan Wireless	Verbindung zum Trainingsgerät	✓	WLAN oder LAN Ambu Wireless Technologie basierend auf der neuesten Generation der Intel WLAN Module
	Ambu Manikin Management Module	✓	Betriebssystemunabhängige- und browserbasierte Steuerung, individuelle Dokumentation von bis zu 4 Teilnehmern, Parallele Anzeige und Steuerung von bis zu 6 Trainingsgeräten, paralleler Mehrfachzugang von verschiedenen Endgeräten zur Visualisierung der Performance möglich
	Stromversorgung	✓	Netzteil, Akku-Pack oder PoE (nicht im Lieferumfang enthalten, optional erhältlich)
Manuelle Kontrollanzeige		✓	Ausfahrbar Beatmungsvolumen, Kompressionstiefe, Handposition, Mageninsufflation

Technische Daten

Gewicht Torso mit Tragetasche	12 kg
Länge Torso	80 cm
Länge ganzer Körper	165 cm

Bestellinformationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
A 234 407 000	AmbuMan Wireless Torso, integrierte Ambu Wireless Technologie Ambu Manikin Management Module, 5 Ambu Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel, Transporttasche / Trainingsmatte
A 234 404 000	AmbuMan Instrument Torso, 5 Ambu Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel, Transporttasche / Trainingsmatte
Zubehör	
234 000 077	Akku-Pack
234 000 706	Erweiterungsset Arme und Beine (vorbereitet für die Verwendung mit Kit i.o. Access) inkl. Hose und Tragetasche
234 000 702	Ambu Einweg-Luftbeutel (100 Stück)
234 000 703	Ambu Gesichtsmasken (5 Stück)
234 000 725	Ambu Guedel Gesichtsmasken (5 Stück)


Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage vorhanden.



AmbuMan Torso Lieferumfang



Anzeigeninstrument

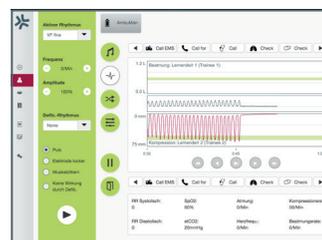

Ambu Manikin Management Module



Transporttasche mit integrierter Trainingsmatte

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu GmbH
In der Hub 5
D-61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de