



Produktübersicht 2023

rescue | defence | firefighting | disaster prevention



NORSE RESCUE®

NORSE oder Nordmänner waren eine nordgermanische ethno-linguistische Gruppe des frühen Mittelalters, in der sie die altnordische Sprache sprachen. Während des späten achten Jahrhunderts begannen die Skandinavier mit einer groß angelegten Expansion in alle Richtungen, die das Wikingerzeitalter auslöste.

Nordische Seefahrer, Händler, Siedler und Krieger werden gemeinhin als Wikinger bezeichnet. Die Identität von NORSE RESCUE® basiert auf der Essenz unserer Vorfahren; NORSE RESCUE® wird neue und innovative Produkte finden, entwickeln und sich auf faire Preise konzentrieren, um Produkte für den präklinischen Umfeld verfügbar zu machen.

„MEDICINA BONA LOCIS MALIS“ Good Medicine in Bad Places ist Teil unserer DNA und wir kennen die Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen. Egal ob es sich um Rettungsdienste auf der Straße oder TCCC im Gefecht handelt - die NORSE RESCUE® Produkte helfen Ihnen. Die Serie befindet sich in der Entwicklung, das heißt, sie wird größer und um zusätzliche Produkte erweitert. Wenn also Ihnen, den Benutzern und Experten, Produkte in der Serie fehlen, lassen Sie es uns wissen und wir werden daran arbeiten, die NORSE RESCUE®-Serie mit allen für Sie relevanten Produkten bereitzustellen.

Wir sind stolz darauf, Ihnen diese nordische Marke vorzustellen, die sich durch Stabilität und gute Qualität in allen NORSE RESCUE®-Produkten auszeichnet.

Unser Ziel für die NORSE RESCUE®-Serie ist, eine zuverlässige Produktserie bereitzustellen, die Ihnen die Qualität bietet, die Sie benötigen, aber zu erschwinglichen Preisen. Sehen Sie sich gerne die Produktbeschreibungen in der Broschüre an und zögern Sie nicht, uns bei An- oder Rückfragen zu kontaktieren.

Auf die richtige Ausrüstung und gute Entscheidungen zur richtigen Zeit kommt es an. NORSE RESCUE®-Produkte unterstützen Sie in diesen entscheidenden Momenten.

Stay safe out there!

Ihr Team von Meier-Medizintechnik

NORSE RESCUE® Patch



Diese NORSE RESCUE® Patches sind aus hochwertigem Gummi für eine einfache Reinigung und längere Haltbarkeit.

Die Patches sind auf der Rückseite mit Klett ausgestattet, um sie einfach an Ihrem IFAK, dem Medic-Bag, auf Rucksäcken oder einer Kappe zu befestigen.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
AC-1	6.4 x 6.4 x 0.3cm	7g	N/A

NORSE RESCUE® Erste-Hilfe-Karte



Die NORSE RESCUE® Erste-Hilfe-Karte ist eine zweiseitige Karte im A5-Format (Vorder- und Rückseite).

Sie enthält die grundlegendsten und wichtigsten Maßnahmen bei Verbrennungen, Knochenbrüchen, Bewusstlosigkeit und Atemwegsproblemen. (Sprache Englisch, andere Sprachen auf Anfrage)

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
AC-000045	14.8 x 21cm (A5)	10g	N/A

NORSE RESCUE® TCCC-Karte



Die NORSE RESCUE® TCCC-Karte ist die standardisierte Methode zur Dokumentation der Verletztenversorgung im präklinischen Umfeld für Kampf- und Nichtkampfverletzungen.

Die Karte wird in einer reißfesten und wasserfesten sowie in einer extra starken Papierform geliefert

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
AC-0025	14.5 x 11cm	5g	N/A

NORSE RESCUE® TCCC-Karte & Stift



Die NORSE RESCUE® TCCC-Karte ist die standardisierte Methode zur Dokumentation der Verletztenversorgung im präklinischen Umfeld für Kampf- und Nichtkampfverletzungen.

Die Karte wird in einer reißfesten und wasserfesten sowie in einer extra starken Papierform geliefert.

Im Lieferumfang ist zusätzlich der NORSE RESCUE® Permanent Marker enthalten.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
AC-0049	14.5 x 11cm	11g	N/A

NORSE RESCUE® Permanent Marker

Der NORSE RESCUE® Permanent Marker ist ein Mini-Permanent Marker, der in jedes IFAK oder jede Tasche passt.



Der Marker wird mit einem Haken an der Kappe geliefert, um eine sichere Befestigung zu ermöglichen.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
AC-0034-AP	9.5 x 1.5 x 1.6cm	6g	N/A

NORSE RESCUE® Nasopharyngealtubus nach Wendl

Dieser NORSE RESCUE® Nasopharyngealtubus nach Wendl in der Größe CH28 ist latexfrei und wurde entwickelt, um die Nasen-Rachen-Schleimhaut beim Einführen zu schützen. Husten und würgen werden durch das weiche Material ebenfalls minimiert.



Der Tubus ist flexibel und resistent gegen Zusammenfallen und Knicken.

Artikelnummer	Größe	Gewicht	Haltbarkeit
AW-00057-1	28F	10g	4 Jahre



NORSE RESCUE® Oropharyngealtubus (Guedeltubus)

Der NORSE RESCUE® Oropharyngealtubus (Guedeltubus) ist ein Hilfsmittel zum Freihalten der Atemwege. Er wird bei einem bewusstlosen Patienten (bei Fehlen entsprechender Abwehrreflexe) zum Offenhalten der oberen Atemwege benutzt.

Der NORSE RESCUE® Oropharyngealtubus hat eine zentrale Öffnung, die das Einführen verschiedener Absaugkatheter ermöglicht.

Es sind verschiedene Größen erhältlich, vom Neugeborenen bis zum großen Erwachsenen.



Artikelnummer	Größe	Gewicht	Haltbarkeit
AW-00120	4-Red	17g	N/A



NORSE RESCUE® Taschenbeatmungsмасke

Die NORSE RESCUE® Taschenbeatmungsмасke ist eine Maske, die hauptsächlich für die Mund-zu-Mund-Beatmung eines nicht atmenden Erwachsenen entwickelt wurde.

Die Maske wird in einem taktischen schwarzen Etui mit einem Paar Handschuhen geliefert.



Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
BR-0011	15 x 11 x 4.5cm	120g	N/A





NORSE RESCUE® Sauerstoffmaske

Die NORSE RESCUE® Sauerstoffmaske mit Reservoirbeutel versorgt den Patienten mit einer hohen Sauerstoffkonzentration.

Die NORSE RESCUE® Sauerstoffmaske wird in Notfallsituationen verwendet, um Hypoxie, auch als niedriger Blutsauerstoff bekannt, zu verhindern.

Artikelnummer	Größe	Gewicht	Haltbarkeit
BR-00113	XL	80g	3 Jahre



NORSE RESCUE® Chest Seal | Vented

Das NORSE RESCUE® Chest Seal mit Ventil ist ein fortschrittlicher Okklusivverband zur Behandlung offener Thoraxverletzungen. Penetrierende Verletzungen der Brust, die zu offenen Brustwunden führen, können zu einem Spannungspneumothorax führen, der zweithäufigsten Ursache für vermeidbare Todesfälle im Gefecht.

Das Chest Seal ist speziell mit einem Hydrogel-Kleber medizinischer Qualität ausgestattet, der stark genug ist, um auf Haut zu haften, die Blut, Schweiß, Haaren, Sand oder Wasser ausgesetzt ist. Die vier belüfteten Ventile verhindern, dass beim Einatmen Luft in die Brusthöhle strömt, während beim Ausatmen Luft durch die Entlüftungskanäle entweichen kann.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
BR-00187	15 x 15cm	46g	5 Jahre



NORSE RESCUE® Chest Seal | non Vented

Das NORSE RESCUE® Chest Seal ohne Ventil ist ein fortschrittlicher Okklusivverband zur Behandlung offener Thoraxverletzungen. Penetrierende Verletzungen der Brust, die zu offenen Brustwunden führen, können zu einem Spannungspneumothorax führen, der zweithäufigsten Ursache für vermeidbare Todesfälle im Gefecht.

Das Chest Seal ist speziell mit einem Hydrogel-Kleber medizinischer Qualität ausgestattet, der stark genug ist, um auf Haut zu haften, die Blut, Schweiß, Haaren, Sand oder Wasser ausgesetzt ist.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
BR-00188	15 x 15cm	46g	5 Jahre



**WE SUPPORT YOU
IN SAVING LIVES**



NORSE RESCUE® Eye Shield

Das NORSE RESCUE® Eye Shield ist ein Polycarbonat-Augenschutz, der den aktuellen militärischen präklinischen Richtlinien für die Behandlung traumatischer Augenverletzungen im Gefecht entspricht. Dieser konvexe, starre Augenschutz ermöglicht es dem Benutzer, das verletzte Auge zu schützen und verhindert, dass äußerer Druck direkt auf die Verletzung ausgeübt wird, wodurch weitere Schäden verhindert werden.

Hergestellt aus einem hochfesten, durchscheinenden roten Polymer, ist es bruchsicher und wird nicht flach oder verformt, wenn Druck ausgeübt wird. Die Löcher im Augenschutz sorgen für eine gute Belüftung. Das Eye Shield ist für eine Verwendung am rechten oder linken Auge konzipiert.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
CL-9	7.3 x 6 x 0.3cm	7.5g	3 Jahre

CE

NORSE RESCUE® Combat Tape



Das NORSE RESCUE® Combat Tape ist ein starkes Tape, das sich ideal zum Abkleben von Verbänden oder Tourniquets eignet. Ein Mehrzweckband für Einsatzkräfte, welches eine zusätzliche Sicherheit bei der Anlage von Verbänden oder Schienen bietet und die Kompression verstärkt.

Das NORSE RESCUE® Combat Tape besteht aus einem hochwertigen Klebematerial und kann von Hand abgerissen werden. Das Tape kann als verstärkte Unterlage für Ihre Bandagen, Mullbinden und Kompressionsverbände verwendet werden. Es wird in einer kleinen, leichten und kompakten Rolle geliefert, die problemlos in jedes MedicBag und IFAK passt.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
CL-20	5cm x 2.5m	40g	N/A



NORSE RESCUE® komprimierte Gaze, Z-Fold

Die NORSE RESCUE® komprimierte Gaze, Z-gefaltet, ist aus hochwertiger Baumwolle für eine maximale Absorption.

Die NORSE RESCUE® z-gefaltete, komprimierte Gaze wird zur einfachen Aufbewahrung vakuumverpackt geliefert und dehnt sich nach dem Öffnen aus. Sie eignet sich daher perfekt, um sie unter einem Kompressionsverband zu verwenden, um eine kritische Blutung zu stoppen.

Die Gaze ist kompakt und leicht, so findet sie in allen MedicBag's und IFAK's Platz.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
CL-26	4.5" x 4.1y / 11.4cm x 37.5m	28g	5 Jahre

CE STERILE R



NORSE RESCUE® Verband



Das NORSE RESCUE® Verbandpäckchen ist steril, einzeln verpackt und mit einer dicken Wundauflage ausgestattet. Es handelt sich um einen elastischen, anschmiegsamen Verband.

Dieser sterile Verband wurde für Ersthelfer, Sanitäter und Rettungskräfte entwickelt und ist zum schnellen und einfachen Auspacken in einer Folie verpackt.

Das Hauptmerkmal ist die zusätzliche Dicke der absorbierenden Wundauflage im Vergleich zu Standardverbänden. Diese Eigenschaft macht diesen Verband zu einer sinnvollen Alternative bei der Behandlung besonders breiter Wunden.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
CL-00167	28 x 20cm	30g	5 Jahre



NORSE RESCUE® komprimierte Gaze, gerollt

Die NORSE RESCUE® komprimierte Gaze, gerollt, besteht aus hochwertiger Baumwolle für maximale Absorption.

Die NORSE RESCUE® gerollte, komprimierte Gaze wird zur einfachen Aufbewahrung vakuumverpackt geliefert und dehnt sich nach dem Öffnen aus. Sie eignet sich daher perfekt, um sie unter einem Kompressionsverband zu verwenden, um eine kritische Blutung zu stoppen.

Die Gaze ist kompakt und leicht, so findet sie in allen MedicBag's und IFAK's Platz.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
CL-27	4.5" x 4.1y / 11.4cm x 37.5m	28g	5 Jahre



NORSE RESCUE® Kohäsive Fixierbinde

Die NORSE RESCUE® Kohäsive Fixierbinde ist atmungsaktiv und hat einen doppelten Klebeeffekt, sodass die Bandage an sich selbst und nicht an der Haut haftet.

Die NORSE RESCUE® Kohäsive Fixierbinde dient zur Fixierung von Verbänden. Sie unterstützt die Kompression von Wundverbänden.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
CL-001119	7.5cm x 4.5m	20g	N/A



NORSE RESCUE® elastische Kreppbandage

Die NORSE RESCUE® elastische Bandage ist eine atmungsaktive, hautfreundliche Bandage mit leichter Kompression. Elastische Kreppbandagen sind ideal zur Unterstützung bei Verletzungen wie Verstauchungen und Schwellungen.

Die Kreppbandage wird häufig zur Unterstützung bei Behandlungen von Verstauchungen, Luxationen, schmerzhaften Gelenken, Venen, Krämpfen und Verletzungen von Sehnen und Muskeln verwendet.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
CL-001120	10cm x 4.5 m	30g	N/A





NORSE RESCUE® Notfallverband 10cm

Der NORSE RESCUE® Notfallverband ist eine multifunktionale Bandage die bei starken Blutungen ihren Einsatz findet. Mit einer Vielzahl von Anwendungen als nicht-pneumatisches Tourniquet ist der Notfallverband seit über 20 Jahren eine zuverlässige Lösung zur Blutungskontrolle.

Der NORSE RESCUE® Notfallverband wurde für die Behandlung größerer Wunden entwickelt und enthält eine Reihe innovativer Funktionen für die sofortige Blutungskontrolle im Gefecht, auf der Straße und zu Hause.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
CL-00456	11 x 6 x 4cm	60g	5 Jahre



NORSE RESCUE® Notfallverband 15cm

Der NORSE RESCUE® Notfallverband ist eine multifunktionale Bandage die bei starken Blutungen ihren Einsatz findet. Mit einer Vielzahl von Anwendungen als nicht-pneumatisches Tourniquet ist der Notfallverband seit über 20 Jahren eine zuverlässige Lösung zur Blutungskontrolle.

Der NORSE RESCUE® Notfallverband wurde für die Behandlung größerer Wunden entwickelt und enthält eine Reihe innovativer Funktionen für die sofortige Blutungskontrolle im Gefecht, auf der Straße und zu Hause.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
CL-00457	15 x 7 x 4cm	87g	5 Jahre



NORSE RESCUE® Notfallverband 20cm

Der NORSE RESCUE® Notfallverband ist ideal für offene abdominale Wunden, traumatische Amputationen, Verbrennungen und andere großflächige Wunden.

Der Verband besteht aus einer 20 cm breiten elastischen Bandage sowie einer 30 cm x 30 cm großen und sterilen Wundauflage. Die elastische Bandage ist mit einem Abrollschutz ausgestattet, die einen effektiven und kontrollierten Anlegevorgang in anspruchsvoller Umgebung gewährleistet.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
CL-00458	20 x 8 x 4cm	164g	5 Jahre



NORSE RESCUE® Bleeding Kit



Das NORSE RESCUE® Bleeding Kit ist eine Zusammenstellung einiger der wichtigsten medizinischen Produkte, die verwendet werden, um schwere und unkontrollierbare Blutungen zu stoppen. Das Kit kann modifiziert werden und die Produkte enthalten, die Sie für Ihren individuellen Einsatz als richtig und relevant erachten. Wir haben ein standardisiertes kleines und ein großes Kit:

Inhalt Klein: NORSE RESCUE® komprimierte Gaze, Z-Fold | NORSE RESCUE® Notfallverband 10cm | NORSE RESCUE® Rettungsdecke | NORSE RESCUE® Nitrilhandschuhe, groß

Inhalt Groß: Combat Application Tourniquet® | NORSE RESCUE® komprimierte Gaze, Z-Fold | NORSE RESCUE® Notfallverband 10cm & 15cm | NORSE RESCUE® EMT-Kleiderschere | NORSE RESCUE® Rettungsdecke | NORSE RESCUE® Nitrilhandschuhe, groß

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
BA-NORSE-S	20 x 14cm	200g	3 Jahre
BA-NORSE-L	30 x 14cm	435g	3 Jahre

NORSE RESCUE® Verbrennungs-Set



Das NORSE RESCUE® Verbrennungs-Set ist ein kleines, leichtes und kompaktes Set, das z.B. während einer MANV-Lage mit Brandopfern an Zivilisten verteilt werden kann. Das Set enthält einige der wirksamsten NORSE RESCUE®-Produkte zur Behandlung von Brandwunden in der präklinischen Umgebung. Darüber hinaus ist der im Kit enthaltene BurnTec Hydrogel-Verband ein hochwirksamer Verband, der eine gleichmäßige Abdeckung und Verteilung der Kühlung über die gesamte Verbrennungsfläche, auch bei ausgedehntesten Verletzungen, garantiert.

Inhalt Klein: BurnTec 10 x 10 cm | NORSE RESCUE® Rettungsdecke | NORSE RESCUE® Kohäsive Fixierbinde

Inhalt Groß: BurnTec 10 x 10 cm | BurnTec 5 x 5 cm | BurnTec 20 x 40 cm | NORSE RESCUE® EMT-Kleiderschere | NORSE RESCUE® Nitrilhandschuhe, groß | NORSE RESCUE® Kohäsive Fixierbinde | NORSE RESCUE® Rettungsdecke

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
EE-00538	20 x 14cm	140g	3 Jahre
EE-00539	30 x 14cm	430g	3 Jahre

NORSE RESCUE® Rettungsdecke



Die NORSE RESCUE® Rettungsdecke bietet kompakten Schutz bei allen Wetterbedingungen. Sie speichert/reflektiert 90 % der Körperwärme.

Diese NORSE RESCUE® Rettungsdecke ist aus einem hochwertigen Material, zudem ist sie wasserdicht und winddicht. Ihre kompakte Abmessung und das geringe Gewicht sorgt für eine einfache Aufbewahrung.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
EE-00261	140 x 210cm	5g	N/A



NORSE RESCUE® Dreieckstuch



Das NORSE RESCUE® Dreieckstuch ist ideal für Schlingen und Schienungen. Die nicht gewebte Version ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Dreieckstücher sind als Erste-Hilfe-Verband unverzichtbar!

Das Dreieckstuch wird einzeln verpackt geliefert.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
RE-11	96 x 96 x 135cm	20g	5 Jahre





NORSE RESCUE® EMT-Kleiderschere taktisch

Die NORSE RESCUE® taktische EMT-Kleiderschere besteht aus einem hochwertigem schwarzem Edelstahl mit einer gezackten Klinge. Die 18,5 cm lange Schere kann durch das härteste Material schneiden.

Sie ist vollständig autoklavierbar.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
EE-000331-BLK	18.5 x 9cm / 7.25"	58g	N/A



NORSE RESCUE® EMT-Kleiderschere

Die NORSE RESCUE® EMT-Kleiderschere besteht aus hochwertigem Edelstahl mit einer gezackten Klinge. Diese 18,5 cm lange Schere kann durch das härteste Material schneiden.

Sie ist vollständig autoklavierbar.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
EE-000331	18.5 x 9cm / 7.25"	52g	N/A



NORSE RESCUE® Scherenhalterung RT2

Die NORSE RESCUE® Scherenhalterung RT2 hat eine Bruchlast von 27 kg.

Sie verfügt über ein Edelstahlseil mit Nylonbeschichtung.

Die Halterung ist salzwasserfest und verfügt über ein Schnellkupplungssystem (Q/C).

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
EE-00011	91.4cm / 36"	40g	N/A

NORSE RESCUE® Splintschiene



Die NORSE RESCUE® Splintschiene, flach gefaltet, ist eine Aluminiumschiene, die zur Schienung aller Extremitäten geeignet ist. Sie besteht aus einem leichten und formbaren, mit Schaumstoff gepolstertem Aluminiumkern. Sie ist weich und anpassungsfähig. Die Schiene wird starr und stützend, indem sie zu einer einfachen C-, W- oder T-förmigen Kurve geformt wird. Die Splintschiene kann mit einer gewöhnlichen Schere auf jede Größe zugeschnitten werden.

- Kann zur einfachen Aufbewahrung gerollt oder gefaltet werden
- Wasserdicht
- Leicht und kompakt
- Wiederverwendbar

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
IM-00047	11 x 91.4cm / 4" x 36"	150g	N/A





NORSE RESCUE® Umbettungstuch

Das NORSE RESCUE® Tragetuch kann auf vielfältige Weise verwendet werden. Ob es sich um alltägliche Notfälle oder Massenunfall- und Katastrophenvorsorge handelt. Das Umbettungstuch fungiert u.a. als Einweg-Patiententransfersystem, um den Patienten auf die Krankentrage zu bewegen.

Es bietet eine Tragfähigkeit von über 226 kg und verfügt über 6 große Handgriffe, die eine einfache Handhabung des Patienten und eine einfache Verwendung des Produkts ermöglichen. Wasserabweisendes, beschichtetes, gewebtes Polyethylen bietet Festigkeit und Haltbarkeit und kann bei 40 Grad Celsius gewaschen werden.

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Haltbarkeit
LS-49	120 x 60cm	502g	N/A

CE EN 1865



NORSE RESCUE® Nitrilhandschuhe


Die NORSE RESCUE® Nitrilhandschuhe sind in verschiedenen Größen erhältlich und werden auf Wunsch unserer Kunden im blau geliefert.

Die Handschuhe sind sowohl puder- als auch latexfrei und werden paarweise in einer kleinen Kartonverpackung geliefert.

Artikelnummer	Größe	Gewicht	Haltbarkeit
PP-NORSE-GLOVESM	Medium	20g	3 Jahre
PP-NORSE-GLOVESL	Large	21g	3 Jahre
PP-NORSE-GLOVESXL	Xtra Large	22g	3 Jahre

EN ISO 14971, 15233-1, 1041 + A1
Medical 2017/745(EU)



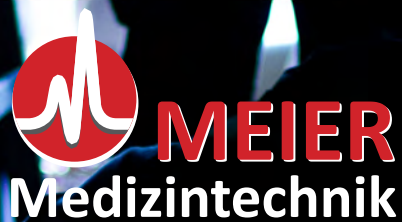

REAL VIKINGS CHOOSE NORSE RESCUE®

Impressum

Herausgeber:

Meier-Medizintechnik GmbH
Friedewalder Straße 22
D-32469 Petershagen

Tel. +49 (0)5704 | 167 301
Fax +49 (0)5704 | 167 302

Email: info@meier-medizintechnik.de
Internet: <https://www.meier-medizintechnik.de>

Amtsgericht:

Bad Oeynhausen HRB 14833

Ust.-ID-Nr.:

DE341994428

Geschäftsführer:

Ilse Meier

Erscheinungsdatum:

Februar 2023



Besuchen Sie uns auf Facebook!
<https://www.facebook.com/meiermed>

AGB:

Für den Geschäftsverkehr gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die aktuelle Version unserer AGB können Sie jederzeit online unter www.meier-medizintechnik.de einsehen oder fordern Sie diese kostenlos bei uns an.